


操作はとても簡単

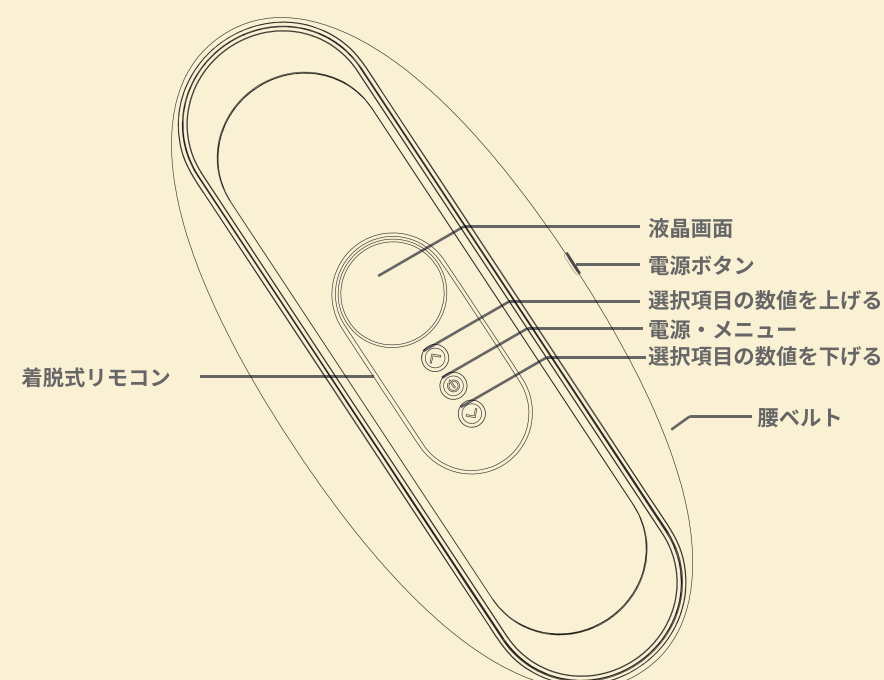

16段階 強度レベル
3段階 温熱機能
6種類 EMSモード
5-30min 自動タイマー設定

EMSとは？

Electric（電氣的）、Muscle（筋肉）、Stimulation（刺激）の頭文字を取ったものであり、電氣的刺激によって筋肉を動かす技術です。
NIPLUX WAISTUPLUSは軽量でありながら、EMS技術であなたの腰回りの悩みに真摯に向き合います。

心地良い温熱・EMSで 腰をじんわりリラックス

コンパクトながら4つある電極で
広範囲の筋肉をほぐことができ、
温めながら、普段あまり動かしなところまで
しっかりとアプローチ



プロの技術を自宅でも堪能




- ・6種類のEMSモード
- ・16種類のEMS強さ

＼腰を和らぐヒーロー／

温熱で腰を集中ケア

温熱機能で腰だけではなくお腹・お尻回りの
下半身の冷えにも。
遠赤外線も搭載。

温度設定は低温・中温・高温の3段階で
あなたにピッタリの温度が選択可能
※温熱オフも可能

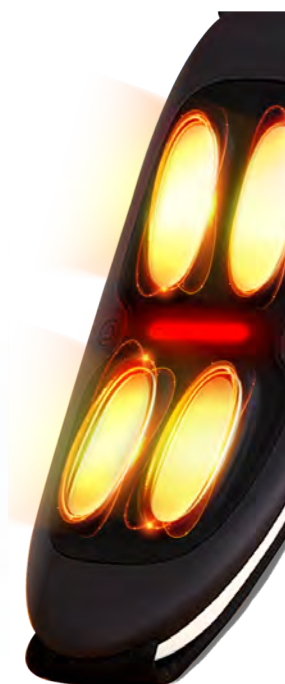

赤外線とは？

赤外線は、波長600-700μmの周波数が低い電磁波です。
人の目では見ることができない光です。
光生物学では、赤外線が一番早く臨床医学に应用され、
幅広い分野で効果が認められています。

取り外し可能なリモコン付 装着中も操作らくらく

お好みで、ジェルや水で腰回りを湿らせてから装着。
（そのままでもお使いいただけます。）



電源ボタンをオンにする。



操作ボタンで6種類から
EMSモードかヒーターを選択。



操作ボタンで16段階から
お好みのEMS強さレベルを選択
3段階から温熱モードも選択可能



同じく操作ボタンで6段階
(5min-30min)
から起動時間を設定



最後に電源がOFFになっている
ことを確認し、
身体から取り外してください。
使用後は、
温熱パッドは柔らかい布などで
簡単に清掃してください。



- ・リモコン操作
- ・自動オフ機能搭載
- ・コードレス使用
- ・調節可能バンド

品名	NIPLUX WAISTUPLUS (ニップラックスウェストプラス)	定格電源/消費電力	5V / 5W
型番	NP-WP20W	電源供給元	モバイルバッテリー/PC等のUSBポート
リモコン電池	CR2032 コイン型リチウム電池	サイズ	約290×170×82mm
本体充電池	容量：1200mAh	重量	300g
連続使用時間	3〜4日（1日30分使用の場合）		

お問い合わせ・ご相談は当店へ

OFFICIAL SNS ACCOUNT



NIPLUXお客様相談センター
商品に対する詳しいご説明・お問合せは下記まで
☎092-719-0756
info@nissoplus.co.jp
※受付時間：平日9:00~17:30
(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

株式会社日創プラス
〒813-0044
福岡県福岡市東区千早5丁目20-1
ニューガイア千早 4F



株式会社
日創プラス



NIPLUX公式
オンラインストア

○安全に関する注意：取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。○当社の製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。○品質改良のため、価格・デザイン・仕様を一部変更する場合があります。○本カタログの内容についてのお問い合わせは、本社にご相談ください。○印刷の色は商品とは多少異なります。○このカタログは2021年4月時点のものです。

Made in China Designed in Japan

温熱 遠赤外線搭載
腰をじんわり温める

NIPLUX



WAISTUPLUS

広範囲で
腰回りをリラックス

EMS

毎日の作業、家事で
あなたの腰は大丈夫ですか

いつも頑張っているあなたに
NIPLUXから手軽な
腰用ヒートストレッチャーをお届けします

それは

「NIPLUX WAISTUPLUS」

