



# NIPLUX FASCIALAX MINI ご紹介資料

株式会社 日創プラス

# 目次

## contents

01 商品紹介

02 ブランド紹介

03 ブランド実績

04 会社概要

P  
ART 01

# 商品紹介

FASCIALAX MINI

ONE

## NIPLUX FASCIALAX MINI

高速振動3,200rpmで皮下50mmまでの筋肉にアプローチする筋膜リリースガン。  
ポケットサイズで場所を選ばず、全身の筋肉をケアできます。



**販売価格：19,800円（税込）**

## 4種類のヘッド、使用方法

### 4種類のアタッチメント



U字型ヘッド

前腕、アキレス腱など、細めの筋肉に。



円柱型ヘッド

足裏や関節など、ピンポイントで深く刺激したい時に。



平型ヘッド

ふくらはぎなど、身体のあらゆる部位に平面で刺激。



球型ヘッド

太腿、臀部、後部など大きな筋肉に。

### ご使用方法

#### STEP 1



電源がオフになっていることを確認して、アタッチメントを取り付ける。

奥までしっかりと差し込んでください。

#### STEP 2



オン/オフ、レベル切り替えボタン(○)を約2秒間押し、バッテリー残量表示ランプが点灯する。

#### STEP 3



もう一度(○)ボタンを押して動作させる。ハンドル部分をしっかりと手で持ち、ケア必要の部位に軽く当てて使用する。

振動レベル表示ランプが1つ点灯し、振動レベル1から開始します。

(○)ボタンを押して、振動レベルを選ぶことができます。



#### STEP 4



使用中に振動を停止するには、(○)ボタンを約2秒間押し電源をオフにする。

# はじめに：昨今の健康意識と血行不良の問題

2020年3月以降、コロナウイルスによる健康意識の向上や、在宅勤務によるパソコンやスマホの普及、デスクワークの増加により日常的に運動や筋力トレーニングを行う人が増えています。

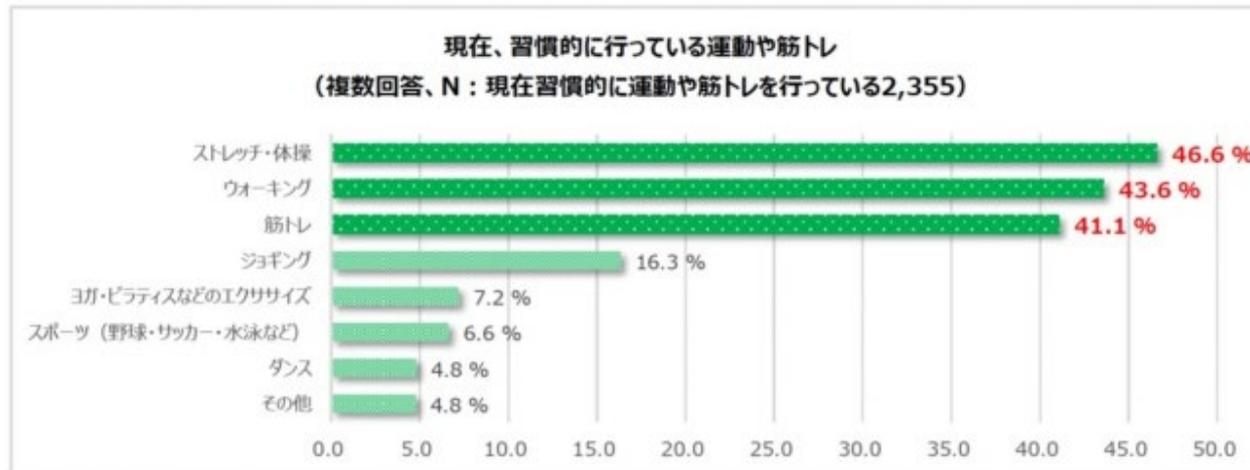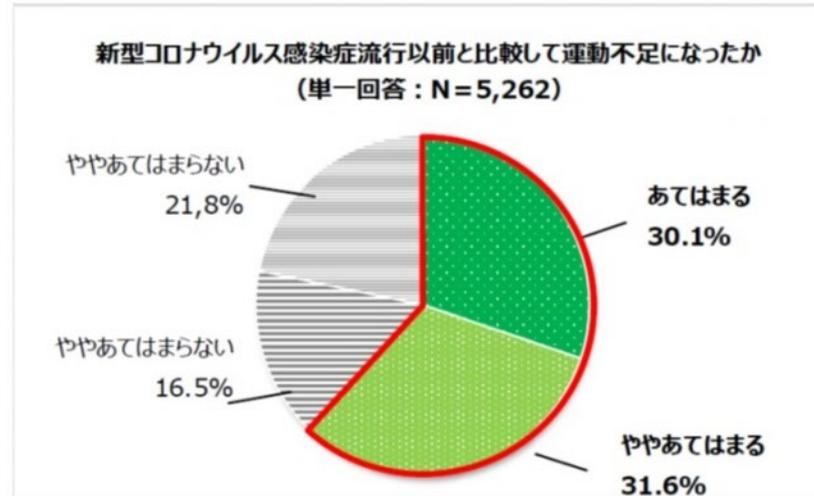


調査主体：ショップジャパン（株式会社オークローンマーケティング）

実施期間：2020年6月

調査対象：全国20歳から69歳までの男女5,262名※人口分布に基づく年代・男女の割り付けを実施

## はじめに：運動と筋肉痛、運動不足と血行不良

健康を意識して筋トレをはじめると多い反面、筋肉のケアを行わずに筋肉痛になってしまう人も。また、長時間同じ姿勢でリモートワークを行う人は筋肉が長時間同じ姿勢になり、筋肉が緊張することで血流が悪くなり痛みを伴うこともあります。

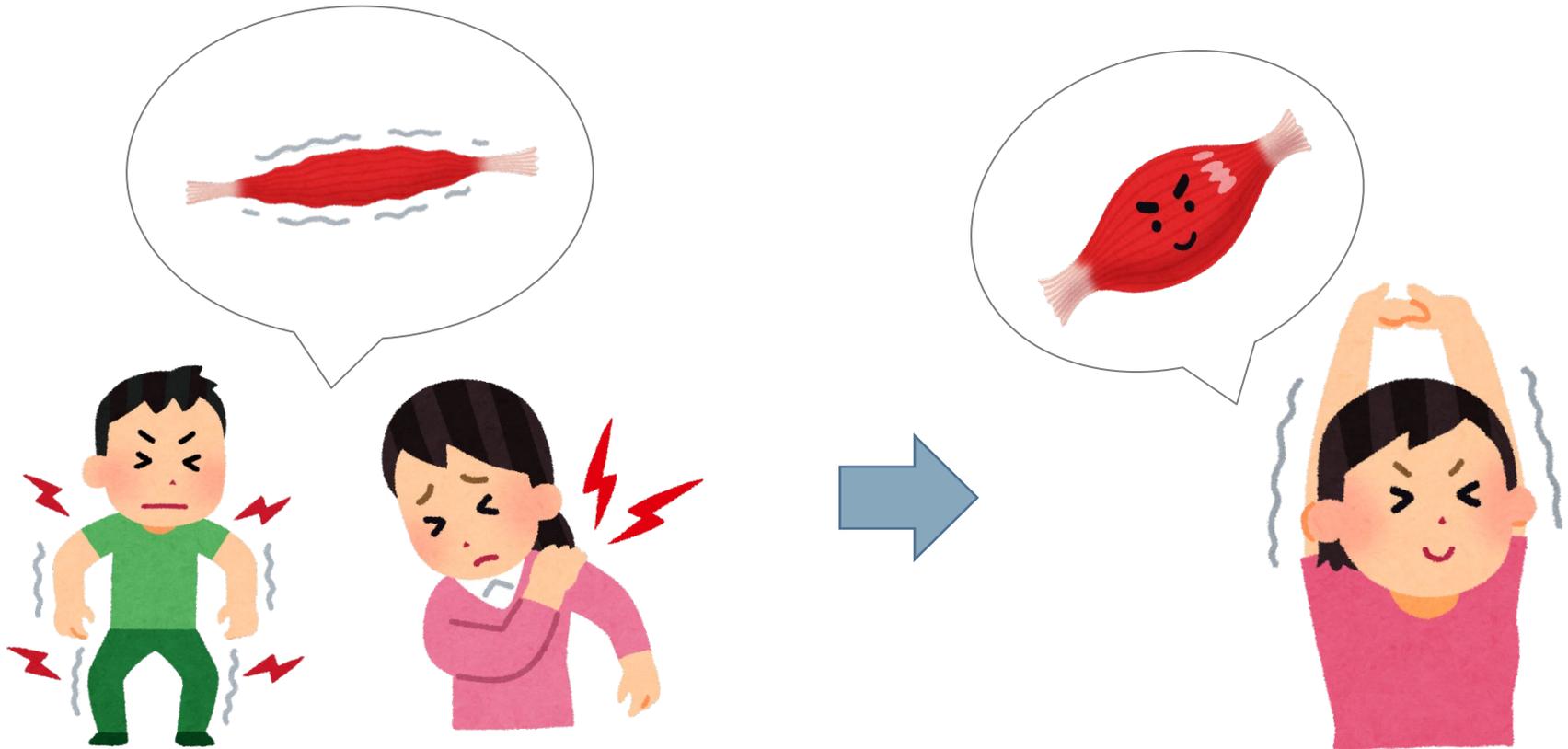

**痛みの緩和には“筋肉のケア”が不可欠**

## 手軽な筋肉ケア NIPLUX FASCIALAX MINI

小さくて軽いのに、パワフルで丈夫。筋肉がスムーズに動かすため、筋膜を柔らかくし滑りを良くして、解きほぐすことを「筋膜リリース」と言います。ジムに通えない今、自宅で簡単に筋膜リリースができるのは「NIPLUX FASCIALAX MINI」。

**NIPLUX**

FASCIALAX MINI

小型なのに、  
強く押し当てても  
**止まらない**

NIPLUXシリーズ  
売上販売台数  
**20万台突破!**

株式会社日創テクノ  
電気用品安全法  
**PSE**  
技術基準適合品  
Product Safety Electrical Appliances and Material

**NIPLUX**  
FASCIALAX MINI

小さくて軽くてパワフル  
話題沸騰中の筋膜リリースガン

- トルク5キロ
- 重さ約500g
- 2時間持続可能
- 簡単USBコード充電
- アルミニウム合金本体

4種類のアタッチメント付

# 機能

## 3,200rpmの高速振動



ハイパワー（70W）のブラシレスモーターを搭載。回転速度は3200rpmに達し、5キロ相当のトルクで深層筋肉をリラックスさせます

## 大容量急速充電



2500mAhリチウム電池を搭載、ACアダプターでの急速充電が可能です。一回の充電で約2週間持続可能なので、バッテリー切れの心配はいりません。（毎日約10分間使用する場合）

## 4段階スピード調整



次世代変圧制御システムを採用し、圧力とともにシステムがトルクを上げることにより、深層筋膜をリリースできます。

## 4種類のヘッドで全身ケア



身体の部位に合わせた4種類のヘッドを自由に選択。全身の筋肉をこれ1個でケア完了



**PSE 認証済** ✓  
NIPLUX FASCIALAX MINI はお客様に  
**安心安全なお買い物を**  
していただくために  
PSE認証を取得しております。

# 特徴

## 超軽量設計



本体は航空用アルミ合金を使用。丈夫で高級感があるのに重さが約500gと軽いので手軽にお使いいただけます。

## USB充電/コードレス



コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ♪

## ポケットサイズ



iPhone11と比べても個のサイズ感。  
ポケットに入るコンパクトさで移動中もかさばりません。

## 静音設計



ハイパワーながら振動音が気にならないので、テレビを見ながらや出先での使用も安心です。

### 筋膜リリースとは？

筋肉がスムーズに動くためには、筋膜の滑りの良さが必要です。筋膜を柔らかくし滑りを良くして、解きほぐすことを「筋膜リリース」と言います。筋膜リリースを行うことにより、筋肉の柔軟性を引き出し、関節の可動域を拡大します。

## セット内容

- 収納ケース
- 本体リリースガン
- アタッチメント (4種類)
- 充電用USBコード (約20cm)
- 化粧箱 ● 保証書兼取扱説明書



※デザイン及び仕様については予告なしに変更する場合がございます。  
※充電中は本体の電源をオンにしないでください。

## セット内容

- ・ 収納ケース \*1
- ・ 本体 \*1
- ・ アタッチメント \*4種
- ・ 充電用USBコード (約20cm) \*1
- ・ 取扱説明書 \*1

## 製品仕様

ブランド	NIPLUX
品名	FASCIALAX MINI (ファシアラックス ミニ)
定格電源	DC 5V 2A (USB)
消費電力	約70W
電源供給元	ACアダプター/PC等のUSBポート
本体寸法	約142mm X 90mm X 44mm
本体重量	約500g
電池	リチウムイオン電池2600mAh

# 筋膜リリースガン

brand	NIPLUX	S社	H社	D社	S社
デザイン					
重量	約500g	約680g	1.1kg	約620g	約370g
製造	中国	中国	記載なし	中国	中国
本体サイズ	約142×90×44mm (アタッチメント除く)	約147×60×186mm (アタッチメント除く)	約170×250×60mm (アタッチメント除く)	約115×160×70mm (アタッチメント除く)	約137×85×48mm (アタッチメント除く)
市場販売価格(税込)	19,800円	21,780円	61,050円	9,900円	13,200円
強度レベル	4段階	4段階	3段階	3段階	5段階
連続使用時間	約2時間	約2時間	約2時間	約4時間	約4時間
Max振動	<b>3,200回</b>	3,300回	3,318回	約3,500	3,000回
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収納ケース</li> <li>・本体</li> <li>・アタッチメント×4種</li> <li>・充電用USBコード(約20cm)</li> <li>・取扱説明書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体×1</li> <li>・アタッチメント×5種類</li> <li>・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×1</li> <li>・充電用USBコード×1</li> <li>・取扱説明書×1</li> <li>・収納ケース×1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体</li> <li>・専用充電器</li> <li>・アタッチメント(5つ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アタッチメント4種</li> <li>・USBコード(Type-C)</li> <li>・収納袋、</li> <li>・取扱説明書(保証書付き)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体×1</li> <li>・アタッチメント×5種類</li> <li>・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2</li> <li>・充電用USBコード×1</li> <li>・取扱説明書×1</li> <li>・収納ケース×1</li> </ul>