



NIPLUX FASCIALAX MINI 2S ご紹介資料

株式会社 日創プラス

目次

contents

01 商品紹介

02 ブランド紹介

03 ブランド実績

04 会社概要

P
ART 01

商品紹介

FASCIALAX MINI 2S

ONE

NIPLUX FASCIALAX MINI 2S

新発想★ピンポイントに刺激 1分に最大2,800回の回転数 気軽に使える軽量サイズ筋膜ガン
全身これ1台でOK



販売価格：13,750円（税込）

8種類のヘッド



緩衝型ヘッド

お顔や首筋など、比較的デリケートな部位に。



平型ヘッド

ふくらはぎなど、身体のあらゆる部位に平面で刺激。



円柱型ヘッド

足裏や関節など、ピンポイントで深く刺激したい時に。



扇型ヘッド

背中、腰椎、腰など広範囲で刺激したい部位に。



円錐型金属ヘッド

ピンポイントでさらに深く刺激したい時に。



平型金属ヘッド

ふくらはぎなど、身体のあらゆる部位を刺激。



球型ヘッド

太腿、臀部、後部など大きな筋肉に。



U字型ヘッド

前腕、アキレス腱など、細めの筋肉に。

8種類のヘッド、使用方法

STEP1



電源がオフになっていることを確認し、アタッチメントを取り付ける。

※奥までしっかり差し込んでください

STEP2



電源ボタンを約2秒間長押しし、バッテリー表示ランプを点灯させる。^{※1}

STEP3



もう一度、電源ボタンを押して動作させる。ハンドルをしっかりと持ち、ケアしたい部位に当てて使用する。^{※2}

STEP4



電源を切る際は、電源ボタンを約2秒間長押しして停止させる。

※1 振動レベル表示ランプが1つ点灯し、振動レベルは1から開始します

※2 顔への使用は必ず緩衝型ヘッドを使用し、強く当てないようにご注意ください
また顔への使用は1日3分以内を目安としてください

商品セット内容

セット内容

- 収納ケース *1
- 本体 *1
- アタッチメント *8種
- 充電用USBコード (約20cm) *1
- 化粧箱*1
- 取扱説明書 *1



製品仕様



ブランド	NIPLUX
品名	FASCIALAX MINI 2S (ファシアラックス ミニ ツーエス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約45W
電源供給元	ACアダプター／PC等のUSBポート
本体寸法	約137mm×111mm×41.5mm
パッケージ箱寸法	約255mm×212mm×94mm
本体重量	約320g
電池	2000mAh
製品素材	ABS
生産国	中国

- 収納ケース
- 本体リリースガン
- アタッチメント(8種類)

- 充電用USBコード
- 化粧箱
- 保証書兼取扱説明書

はじめに：昨今の健康意識と血行不良の問題

2020年3月以降、コロナウイルスによる健康意識の向上や、在宅勤務によるパソコンやスマホの普及、デスクワークの増加により日常的に運動や筋力トレーニングを行う人が増えています。

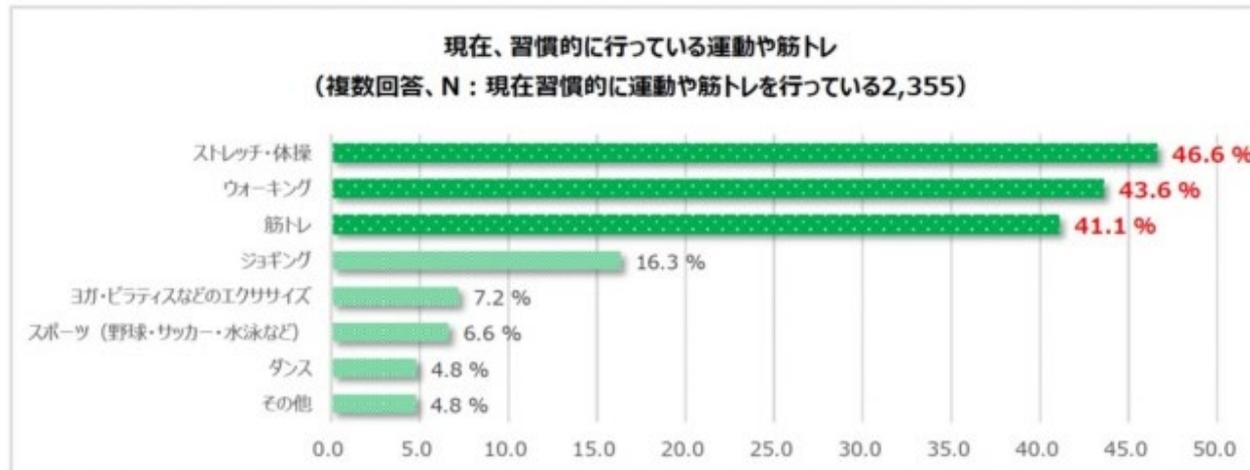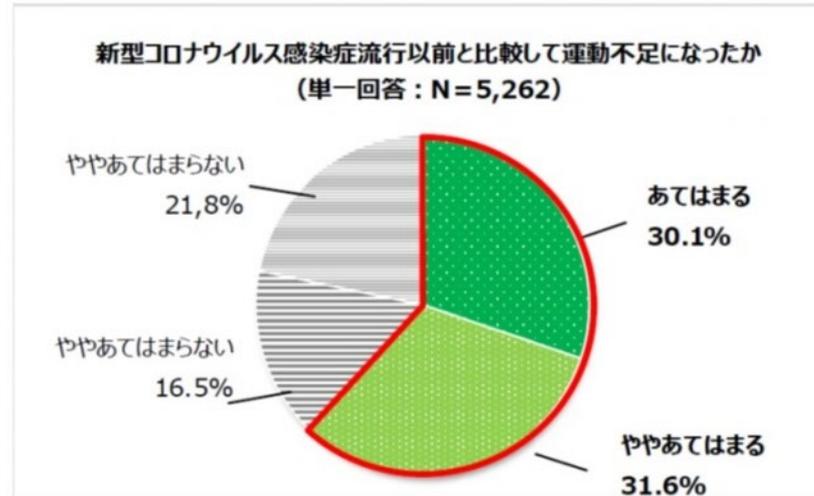


調査主体：ショップジャパン（株式会社オークローンマーケティング）

実施期間：2020年6月

調査対象：全国20歳から69歳までの男女5,262名※人口分布に基づく年代・男女の割り付けを実施

はじめに：運動と筋肉痛、運動不足と血行不良

健康を意識して筋トレをはじめると多い反面、筋肉のケアを行わずに筋肉痛になってしまう人も。また、長時間同じ姿勢でリモートワークを行う人は筋肉が長時間同じ姿勢になり、筋肉が緊張することで血流が悪くなり痛みを伴うこともあります。

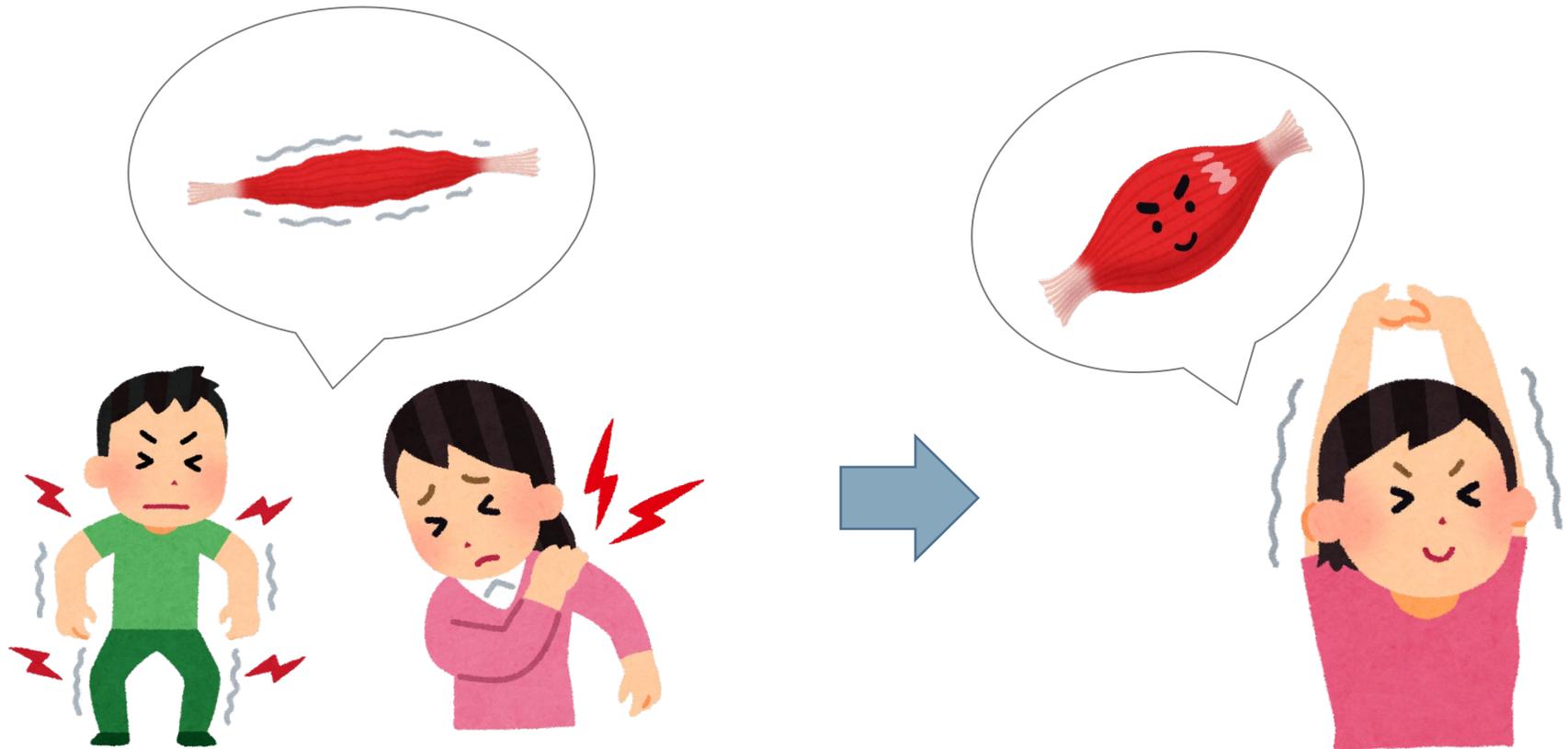

痛みの緩和には“筋肉のケア”が不可欠

ボディ & 美容ケア NIPLUX FASCIALAX MINI 2S

ボディケアと美容ケアまで考えた小型ハンディガン「NIPLUX FASCIALAX MINI 2S」。
 身体にも顔にも使える丁度いい「パワー」と「軽さ」を兼ね備えた筋膜リリースガンの誕生！



これ一つで
カラダケアと**美容ケア**を
 同時に叶える



機能

2,800rpmの高速振動

振動レベル/
充電残量表示ランプ*

レベル1 (表示ランプ)	レベル2 (表示ランプ)
1分間あたりの回転数 / 900回	1分間あたりの回転数 / 1500回
レベル3 (表示ランプ)	レベル4 (表示ランプ)
1分間あたりの回転数 / 2100回	1分間あたりの回転数 / 2800回

*充電残量表示は電源ボタン長押し時と充電時に表示されます
※振動レベルは電源ボタン長押し後、電源ボタン短押しで表示されます

便利なUSBtype-C充電

電源オン・オフ
(約2秒長押し)
表示レベル
切替ボタン

ボタンを短押しするたびに、
振動レベルが切り替わります

連続動作時間
約2時間
USB Type-C に対応

【充電口】
USB type-C

小型ハンディガンは振幅（ストローク）が4mmしかないのに対して、FASCIALAX MINI 2Sは1.5倍の6mmストロークで、振動が深く伝わります。

便利なUSBtype-C充電で、連続動作時間は約2時間使用可能です。

特殊シリコンヘッド

専用ソフト アタッチメント



柔らかな
特殊
シリコンヘッド

顔や首など繊細部分に特化した専用の柔らかな特殊シリコンヘッドを使用しているので、デリケートな顔や首へも安全にご使用いただけます。

8種類のヘッドで全身ケア



顔から脚の裏まであらゆる部位にフィットするよう計算された、素材や形状の異なる8つのヘッドが気になる部分をここちよく刺激します



PSE 認証済 ✓
NIPLUX FASCIALAX MINI はお客様に
安心安全なお買い物を
していただくために
PSE認証を取得しております。

特徴

超軽量設計



本体は航空用アルミ合金を使用。丈夫で高級感があるのに重さが約320gと軽いので、女性やシニアにも楽に片手でお使いいただけます。

USB充電/コードレス



コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ♪

ポケットサイズ



お手持ちの携帯とほぼ同じ大ききで、ポケットに入るコンパクトさで移動中もかさばりません。

静音設計



動作音はわずか45db*以下なので、静かな場所でも使えます。

*【騒音目安】

40db (静かな住宅地など)

50db (家庭用クーラーなど)

筋膜リリースとは？

筋肉がスムーズに動くためには、筋膜の滑りの良さが重要です。筋膜を柔らかくし滑りを良くして、解きほぐすことを「筋膜リリース」と言います。筋膜リリースを行うことにより、筋肉の柔軟性を引き出し、関節の可動域を拡大します。

MINIとMIN2Sつの違い

「FASCIALAX MINI」 「FASCIALAX MINI 2S」

よく似たこの2つの商品の違いは？

FASCIALAX MINI



特徴

**強力なパワーと高性能を求め
る方や、ハードユーザー向き**

強カトルク搭載で5kg相当の圧力にも耐えられるから、気になる部位に強く押し当てても止まりません。

FASCIALAX MINI



特徴

**顔にも身体にも使いたい方や、
軽さを重視する方向き**

重さ約 320g で顔にも使える専用アタッチメントも付属。顔と身体を一個のリリースガンで全身ケア。

筋膜リリースガン

brand	NIPLUX	NIPLUX	S社	H社	D社	S社
デザイン						
重量	約320g	約500g	約680g	1.1kg	約620g	約370g
製造	中国	中国	中国	記載なし	中国	中国
本体サイズ	約137×111×41.5mm (アタッチメント除く)	約142×90×44mm (アタッチメント除く)	約147×60×186mm (アタッチメント除く)	約170×250×60mm (アタッチメント除く)	約115×160×70mm (アタッチメント除く)	約137×85×48mm (アタッチメント除く)
定価 (税込)	13,750円	19,800円	21,780円	61,050円	9,900円	13,200円
強度レベル	4段階	4段階	4段階	3段階	3段階	5段階
連続使用 時間	約2時間	約2時間	約2時間	約2時間	約4時間	約4時間
Max振動	2,800階	3,200回	3,300回	3,318回	約3,500	3,000回
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> ・収納ケース ・本体 ・アタッチメント×8種 充電用USBコード (約30cm) ・化粧箱 ・取扱説明書 	<ul style="list-style-type: none"> ・収納ケース ・本体 ・アタッチメント×4種 充電用USBコード (約30cm) ・取扱説明書 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体×1 ・アタッチメント×5種類 ・アタッチメント用ストッパー ム(予備)×1 ・充電用USBコード×1 ・取扱説明書×1 ・収納ケース×1 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・専用充電器 ・アタッチメント(5つ) 	<ul style="list-style-type: none"> ・アタッチメント4種 ・USBコード (Type-C) ・収納袋 ・取扱説明書 (保証書付き) 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体×1 ・アタッチメント×5種類 ・アタッチメント用ストッ パーゴム(予備)×2 ・充電用USBコード ×1 ・取扱説明書×1 ・収納ケース×1