



# NIPLUX NECK RELAX 1S ご紹介資料

株式会社 日創プラス

# 目次

## contents

01 商品紹介

02 ブランド紹介

03 ブランド実績

04 会社概要

P  
ART 01

# 商品紹介

NECK RELAX 1S

ONE

# NIPLUX NECK RELAX 1 S


EMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ



**販売価格：13,860円（税込）**

# ご使用方法

## STEP1

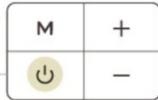

電源・温熱切り替えボタンを  
長押ししてオンにする

使用中、本体を停止させたい時は (⏻) ボタンを  
約 2 秒間長押しします。

\* 本体への接触が無い場合、起動後約 2 分で電源が自動的  
に切れます。


## STEP2



電源・温熱切り替えボタンを  
短押しして加熱モードを選ぶ

加熱レベルは「レベル 1～3」と「加熱オフ」か  
ら選ぶことができます。

## STEP3

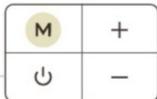

EMSモード/音声切替ボタン  
を短押ししてモードを選ぶ

(M) ボタンを押す度に 6 種類のモードが切り替わ  
ります。また (M) ボタンの長押しで音声案内と無  
音操作が切り替わります。

\* EMS 強さレベルはモードを切り替える度に、強さレベ  
ル 1 にリセットされます。

## STEP4




(+/-) ボタンを押し、  
EMS の強さレベルを選ぶ

EMS 強さレベルは 16 段階の強さからお選びいた  
だけます。また (-) ボタンの長押しで EMS 刺激  
を停止されることが出来ます。なお、本製品は使  
用時間 15 分経過で自動オフになります。

\* 初めてご使用になる方は EMS 強さレベル 1 からのご利  
用をおすすめいたします。

## STEP5

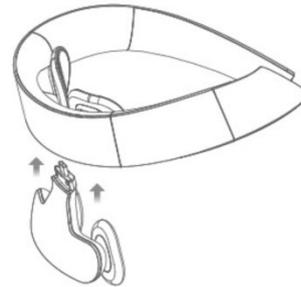

背中用の電極パッドを  
付けて使ってみる

取り外し可能な電極パッド  
は、本体パッドと同様の  
EMS・温熱効果があります。  
しっかりと差し込み口に接  
続して使ってください。

# よく似た3つの商品の違いは？

## NECK RELAX

首専用EMS機器



着用感

首元の筋肉が心地よく収縮

EMSが筋肉をキューッと心地よく刺激。  
2段階温熱機能付きで、首周りが比較的細い女性や首周りを重点的にケアしたい方におすすめです。

## 「NECK RELAX 1S」は

首と肩下、両方にアプローチするEMS機器です



EMSが首周りと背中をキューッと心地よく刺激。首と肩下を同時にケアしたい方、首周りが一般的に太い男性の方、家族で使用したい方におすすめです。3段階温熱機能付き。

着用感

首元と肩下の筋肉が同時に収縮

## SHOULDER RELAX

肩専用EMS機器



着用感

僧帽筋が収縮しパワフルに肩全体が動く


普段意識して動かさにくい僧帽筋にEMSがパワフルに働きかけて、ダイナミックな動きを発生させ、違和感にアプローチします。  
2段階温熱機能付き。

場所を選ばずいつでも気軽に本格的な「ながらケア」

家事を  
しながら



おうちでの  
リラックスタイムや

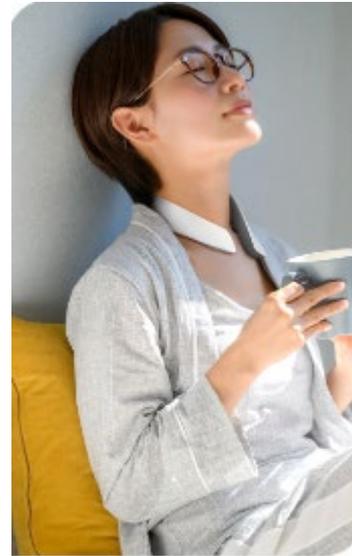

通勤中や  
旅行の移動中にも

\*飛行機の中でもお使いいただけます


仕事を  
しながら



## 首周りへの圧迫感を解決

NECK RELAX 1S は柔軟性のあるフレームを採用することで、女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。

柔軟フレーム設計で、  
首周りが窮屈になりがちな  
男性にもおすすめ！

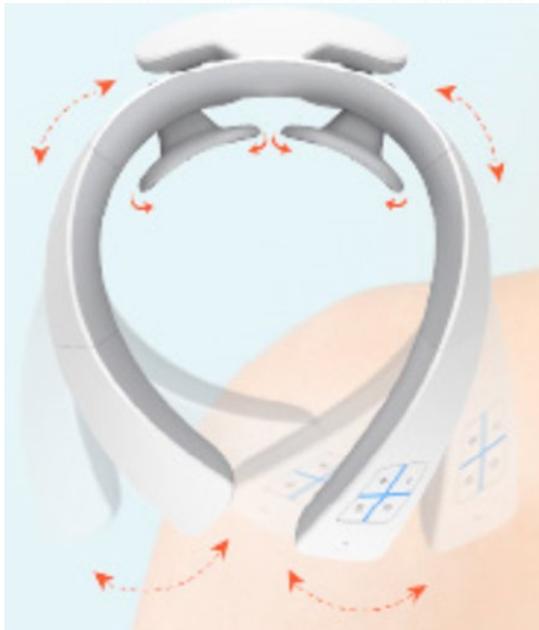

フレキシブルフィットだから  
男性にも女性にも◎  
家族みんなで使える！

## 2WAY仕様でいつでもどこでも



**折れにくい丈夫な肩パッド接続部**

つけたまま寝転がっても  
**問題なく使える!**

接続部分をしっかり補強することで、仰向きに寝ても折れる心配もなく安心です。\*

\*あまりに無理な体勢でご使用になると壊れる恐れがありますので、ご注意ください。

首と肩下に当たるパッド部分は取り外し可能になっており、気分に合わせてご使用いただけます。

# EMS健康機器としての機能ももちろん充実！

## 首と背中を感じる、こちよさ

温熱モードをオンにすると、  
素早く加熱を開始。  
こちよい温熱とEMSのW効果で  
カラダも心もリフレッシュ。



あ、肩下まで  
いい感じ♪

## 温熱とEMSで首元から じ〜んわりほめてく


温熱無しや  
温熱のみの  
使用も可能

3段階の温度調節でその日の  
気分に合わせてお好みの  
温度でご利用できます。

温熱レベル1	温熱レベル2	温熱レベル3
35°C~39°C	37°C~43°C	39°C~45°C

※使用の環境によっては温度が前後する場合があります


## 6種類のEMSモード搭載

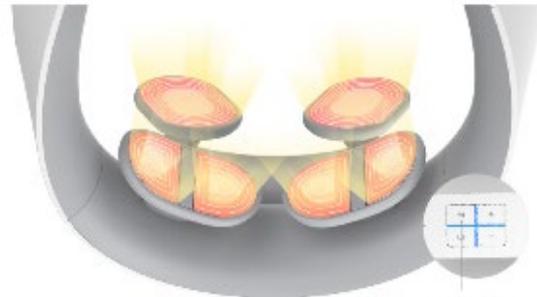

EMS/温熱モード  
切り替えボタン

EMS  
単独での  
使用も可能

心地よさを追求した6つの複雑に  
入り組むオシロプログラムを搭載。  
**単調な動きしかないの格安低周  
波機器とは全く感覚が近いです。**

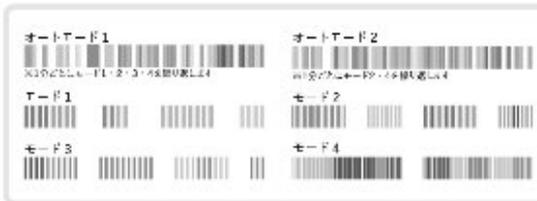

## 首・肩・背中の広範囲を刺激



EMSの強さレベルを調整することにより、  
運動を与える範囲も調整できます。



level 1



level 9

初めての方は強さレベル1~2から使用し  
ていただき、徐々にレベルを上げてお好み  
の強さでご利用ください。

好みの強さを選べる  
**16**段階EMS  
強さレベル調整

# シンプル操作で表示も充電も楽々スマート




正面左側に  
音声スピーカー  
ガイダンス

## 選べる音声 or 無音かんたん操作

着用した状態で、モード、温度、EMS の強さレベルを調整できます。また、音声ガイダンス搭載で、ボタンを見なくても簡単に操作できます。

EMSモード/  
音声切替ボタン  
(長押しするときに音声オン/  
オフが切り替わります。)

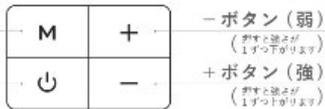

サイレント操作で、  
周囲を気にせず  
いつでもどこでも

メモリー機能付きで  
音声オフのまま終了  
すると次回起動時も、  
音声オフの状態を維持  
して起動します。



フル充電時  
**60分**  
使用可能  
USB TYPE-C 充電  
日本企業開発

## 長時間使える大容量バッテリー

大容量バッテリー仕様でフル充電時、1日1回のご使用で約6日間\* ご使用いただけます。


\*1日1回 EMS レベル1・温熱レベル1 で使用した場合。  
ご使用の状況により使用可能回数は変化してまいります。



## 楽々コードレス仕様+USB Type-C 充電

コードレス仕様でいつでもどこでも気軽に使えます。充電も付属の USB コードで OK。\*

\*充電アダプターは付属しておりません。別途ご購入頂くか、お手持りのアダプターをご使用ください。

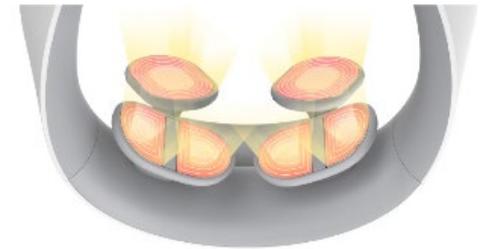

## 15分自動オフ機能であんしん

使用後から15分で自動的に電源がオフに切りかわります。ついうっかり付けたまま寝てしまっても安心です。



ご使用後は電極パッドを軽くふき取るだけでお手入れも終了。面倒な手間はかかりません。

# セット内容

## WHITE



本体製品 & 取外し可能電極パッド



化粧箱 (WHITE用)

## NAVY GREEN



本体製品 & 取外し可能電極パッド



化粧箱 (NAVY GREEN用)

## WHITE & NAVY GREEN 共通



USBケーブル



取扱説明書兼保証書