


従来のリリースガンはパワーも  
十分に高性能で軽量というのが売りでした。  
しかし女性のお客様から  
「パワーをもう少し落として顔の筋肉にも  
使える軽い物が欲しい」  
と言うお声を多数頂きました。

そんな皆様の声にお応えするため、  
顔にも使える丁度いい「パワー」と「軽さ」を兼ね備えた  
「FASCIALAX MINI 2S」が生まれました。



NIPLUX  
FASCIALAX MINI 2S  
筋膜用小型ハンディガン

## 操作はとっても簡単

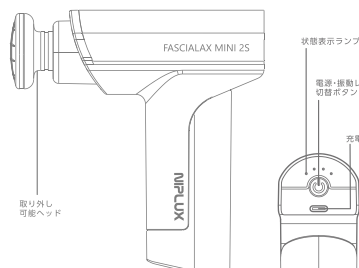

4段階の  
レベル調整

1分間最大  
2800回振動

10分オート  
オフタイマー

### 筋膜リリースとは？

普段意識してあまり動かすことのない筋膜や深層筋肉に、外側から刺激を与えアプローチすることを「筋膜リリース」と言います。筋膜リリースを日常からこまめに行うことにより、快適な日々の生活をサポートします。

#### 商品特徴

顔も身体も 同時ケア	8種類の アタッチメント	320gの 軽量設計
あんしん 1年保証	動作時間 約2時間	充電式電池

家庭用小型筋膜ケア用品

商品名	FASCIALAX MINI 2S	定格電源/消費電力	DC 5V 2A/45W
型番	NP-FX21WT-2S	電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
電池容量	2000mAh	本体サイズ	137mm×111mm×41.5mm
製品素材	ABS	本体重量	320g

ご購入求め、その他ご不明な点等のご相談は当店へ

#### OFFICIAL SNS ACCOUNT



@niplux\_official



@Niplux\_official



@NISSOPLUS

#### NIPLUX公式お客様相談センター

商品に関する詳しい説明・お問い合わせは下記まで

☎092-719-0756  
info@nissoplus.co.jp

※受付時間：平日 9:00~17:30  
(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

○安全に関する注意：取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。○当社の製品は一般家庭用です。医療機関ではありません。○品質改良のため、価格・デザイン・仕様を一部変更する場合があります。○本カタログの内容についてのお問い合わせは、本社にご連絡ください。○印刷の色は商品とは多少異なります。○このカタログは2021年12月時点のものです。

Made in China / Designed in Japan

#### 株式会社日創プラス

〒812-0011  
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2  
Park Front 博多駅前1丁目8・9階



・公式サイト・

## 01 パワフル振動で奥深くまで

ストロークが通常の1.5倍だから  
到達力が違う \*当社マーケティング調査結果による

一般的な小型ハンディガンはストロークが  
4mm程度しかないのに対し、FASCIALAX  
MINIは1.5倍の6mmストローク。  
振り子の原理と同様に、ふり幅が大きい程、  
振動は深く伝わります。



## 02 選べる8つのアタッチメント



8つのアタッチメント付きで  
お顔にも身体にも使える！



顔から脚の裏まであらゆる部位にフィット  
するよう計算された、素材や形状の異なる  
8つのアタッチメントが、気になる部分を  
ここちよく刺激します。

50万回  
500,000回  
1年保証

フェイスもボディも、  
同時にケア。

Dr. 発想・設計開発  
九州大学工学博士 Dr.Ben Han氏監修

NIPLUX  
FASCIALAX  
MINI 2S

コンパクトボディ  
フロンティア  
ミニマム

## ご使用方法 HOW TO USE

### STEP1



電源がオフの状態、アタッチメントを取り付ける。※奥までしっかり差し込んでください。

### STEP2



電源ボタンを約2秒間長押しし、バッテリー表示ランプを点灯させる。※1

### STEP3



もう一度、電源ボタンを押して動作させる。ハンドルをしっかりと持ち、ケアしたい部位に当てて使用する。※2

### STEP4



電源を切る際は、電源ボタンを約2秒間長押しして停止させる。

※1 振動レベル表示ランプが1つ点灯し、振動レベルは1から開始します  
※2 顔への使用は必ず緩衝型ヘッドを使用し、強く当たらないようご注意ください。  
また顔への使用は1日3分以内を目安としてください。

## 03 デリケートな顔にも使える

1 あご下から耳の下までゆっくりとヘッドを動かし、クルクルと3回程度回す。  
2 口角横から耳横までゆっくりとヘッドを動かす。  
3 はうり線から小鼻の横を通り、頬の下の下に動かすイメージで、こめかみまでゆっくりとヘッドを動かす。  
4 最後に耳の下から、肩にかけてゆっくりとヘッドを動かし、流していく。

900回/分の振動で、  
4振動レベル1(フェイスモード)1分使用時

こうきん  
「咬筋」  
にアプローチ！

※顔に使用する場合は必ず緩衝型アタッチメントを使用し、レベル1で顔に軽く触れる程度に当ててください。※目の周りや骨部への使用は避け、顔全体で3分以内を目安としてください。※痛みや異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、専門の医師へご相談ください。

## 04 軽量コンパクトで疲れない

重さ約302gの軽量設計

コンパクトボディ×大容量バッテリー

スマートフォンとはほぼ同じ大きさで  
長時間連続使用約2時間

## 身体にフィットする 8つのアタッチメント

**平型ヘッド**  
ふくらはぎなど、身体のある部位に平面で刺激。

**円柱型ヘッド**  
足裏や関節など、ピンポイントで深く刺激したい時に。

**扇型ヘッド**  
背中、腰横、膝など広範囲で刺激したい部位に。

**緩衝型ヘッド**  
お顔や首筋など、比較的デリケートな部位に。

**円錐型金属ヘッド**  
ピンポイントでさらに深く刺激したい時に。

**平型金属ヘッド**  
ふくらはぎなど、身体のある部位を刺激。

**球型ヘッド**  
太腿、臀部など大きな筋肉に。

**U字型ヘッド**  
前腕、アキレス腱など、細めの筋肉に。