

NIPLUX

SILK SKIN 取扱説明書

保管用


保証書付



公式サイト

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全
にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読み
になられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ (www.niplux.jp)

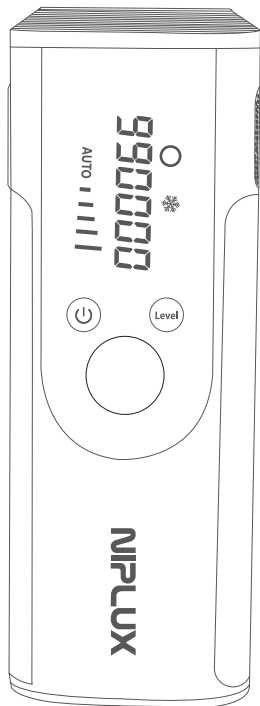

目次

安全上の注意	03
各部の名称とはたらき	09
ご使用前に	10
ボタン操作方法	12
お手入れの頻度、時間の目安	14
ご使用方法	15
照射後は必ず保湿を行ってください	19
お手入れ・保管	21
商品仕様	22
保証書	23

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねます。



危険

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器



注意

- 本体を電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないでください。
- 本製品を長時間使用しないでください。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。
- 小さなお子様・ペットの手の届く場所に保管しないでください。
- 浴室などの湿気の多い場所で使用したり保管しないでください。
- 本製品にヒビ・亀裂など不具合が生じた場合は使用しないでください。

警告

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 急性疾患がある方 ●有熱性疾患がある方 ●結核性疾患の方 ●血友病疾患の方
 - 血圧異常の方 ●悪性腫瘍がある方 ●伝染病疾患の方 ●心臓疾患の方 ●狭心症の方
 - 3ヵ月以内に放射線治療や化学療法を受けたことがある方 ●多発性硬化症の方
 - 紫斑病など内出血しやすい方 ●皮膚ガン病歴がある方 ●てんかんをお持ちの方
 - 糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●妊娠中・出産直後の方 ●授乳中の方
 - 顔面神経痛をお持ちの方 ●ケロイド体質 ●アトピー性皮膚炎の方
 - 過度の日焼けをしている方 ●ニキビが化膿し炎症を起こしている方
 - アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ●化粧品や化学繊維等がかぶれた経験がある方
 - ステロイド系ホルモン剤の長期服用や肝機能障害で毛細血管の拡張を起こしている方
 - 事故等により頭部や眼科的後遺症がある方 ●海水浴や大衆浴場へ行く前の方
 - 本品を使用する前後6週間以内に脱毛を行う、または行った方
 - 本品を使用する前後1週間以内に美白化粧品やビタミンAが含まれた化粧品等を使用する、またはされた方
 - 乳幼児 ●自分の意思で動いたり、意思表示ができない方
 - その他医師の治療を受けている時や療養中、身体に異常がある場合
- ※事故や肌、身体に異常が起きるおそれがあります。



禁止

安全上のご注意



必ず守る

- 使用前に操作ボタンを全て操作し、本体が正常に作動するか、付属品も問題がないか確認を行う。万一、破損や異常等がある場合は使用しない。
(けが・事故・故障の原因)
- コードは必ず付属のものを使用する。(火災・感電・ショートの原因)
- ご使用後は、コードを本体及びコンセントから抜く。プラグを抜くときはコードを引っ張らず、プラグ本体を持って抜く。(断線やショート、感電の原因)
- 濡れた手で使用したり、コンセントを抜いたりしない。(感電や事故の原因)

警告



禁止

- 本体や付属品の分解、改造、修理は絶対にしない。
修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。(火災・感電・けがの原因)
- 本体・付属品のお手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない。
汚れがひどい場合は、水を含ませた布を浸してよく絞り、優しく汚れをふき取ってください。その後、乾いた布で拭いてください。(変色、変形や事故、故障の原因)

警告

使用中



必ず守る

- 初めてご使用される方や、肌が敏感な方は、目立たない部位で出力レベルを低く設定し様子を見ながら使用する。(肌トラブルや事故の原因)
- アクセサリーなどの金属類ははずして使用する。(事故やけがの原因)
- 過度に使用しない。(肌トラブルの原因)
- 本器は通電した状態で放置をしない。(事故の原因)
- 本器は家庭用機器のため業務目的で使用しない。
- 本器を使用し、痛みや不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ等の皮膚症状が現れた場合や、その他に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、2日たっても症状が続く場合は皮膚科医に相談する。(症状が悪化する原因)
- 本器をご利用中に異臭や、本体が異常に熱い場合は直ちに使用を中止する。
(けが・事故・故障の原因)


警告



必ず守る


- 使用や保管は高温多湿・振動・直射日光・火気・車内などの近くでは行わない。
(感電・ショートによる火災・故障の原因)
- 本器は防水仕様ではないため、浴室や湿気の多い場所では使用しない。
(感電・火災・故障の原因)
- コードやプラグに埃やゴミが付着したまま使用しない。
(火災・感電・ショートの原因)
- 本体のお手入れをする際は必ず電源を切り、稼働中は行わない。
(感電や事故の原因)
- 乳幼児や自分で意思疎通が出来ない方の手の届かない場所へ保管する。
(けが・事故・故障の原因)
- 取扱説明書に従って操作する。(けが・事故・故障の原因)
- 使用時間、使用頻度は取扱説明書に従って使用する。(けが・事故の原因)

各部と名称のはたらき

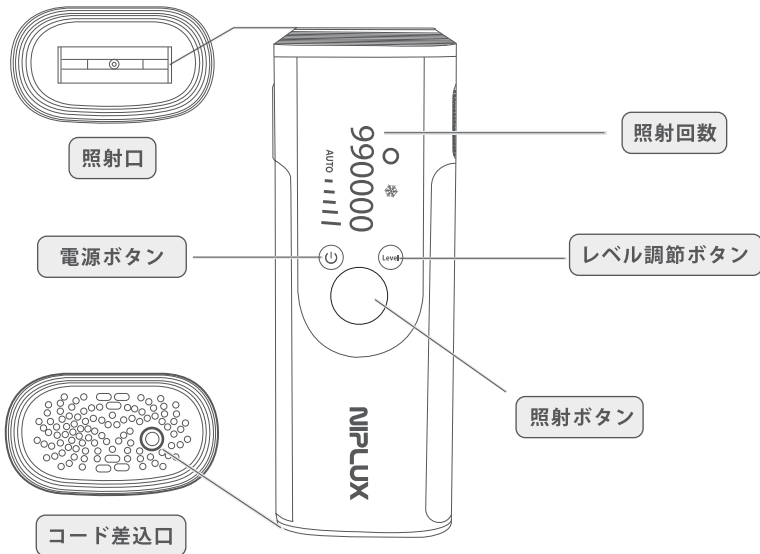


ご使用前に

付属品の確認

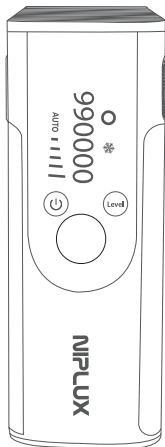

本体

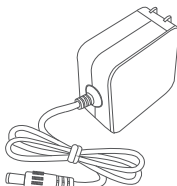

ACアダプター



保護グラス



シェーバー




取扱説明書



収納ケース

ご使用前に

通電方法

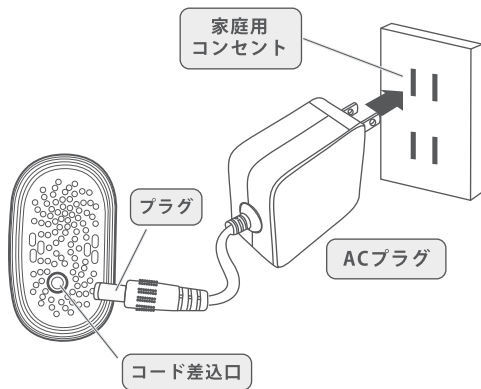

- 1、コードのプラグを本体下部のコード差込口に差し込む。
- 2、ACプラグを家庭用コンセントに差し込むと本体のLED画面に【OFF】と表示される。

※通電だけしている状態で電源は入っていません。
※付属のACアダプター以外使用しないでください。

ボタン操作方法

1



1.電源を入れる

電源ボタンをタッチすると、LED画面が点灯し電源が入ります。

2




2.レベルを選ぶ

レベル調節ボタンを繰り返しタッチすることで照射レベルを調節できます。

お肌の状態に合わせて適切なレベルを選択してください。

ボタン操作方法

3

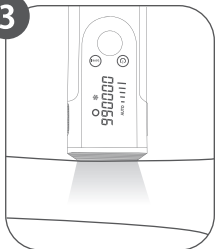


3. 照射する

皮膚に触れるとLED画面が点滅し、
照射ボタンを押すとレーザーが照射されます。


※フラッシュの発光時間はお肌の状態によって変わります。

※使用できない部位
目の周りなどの敏感な部位
ほくろ・唇・乳頭等の色の
濃い部分

4

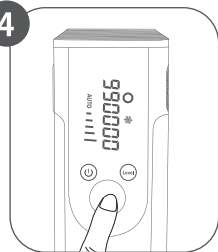

5

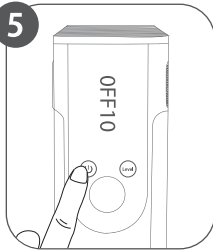

4.AUTO自動 / 手動モード切替

照射ボタンを3秒以上長押しして、
自動モードを切り替えます。

5.電源を切る

電源ボタンを3秒長押しすると、
10秒のカウントダウンになります。
カウントダウンが終わると、電源が切れます。

※無操作状態が続くと5分で電源が切れます。

お手入れの頻度、時間の目安

頻度



※皮膚やお身体の状態を見ながらご使用頻度を調整してください。


時間の目安

足	両足で、1日約8分間(約320回照射)
腕	両腕で、1日約5分間(約200回照射)
ワキ	両ワキで、1日約2.5分間(約100回照射)
ビキニライン	1日約2分間(約80回照射)
顔	1日約1.5分間(約60回照射)

※お手入れにかかる時間は、各部位の体毛の濃さ、使い方によって異なります。

ご使用方法

- 照射箇所を清潔にし、よく乾かしてください。
- お手入れする箇所は必ず先に除毛をしてください。本製品には除毛機能はございません。付属のシェーバーやお持ちのシェーバーをご利用ください。
- ジェルや化粧水等は必要ありません。
- シェーバーによる処理をお薦めしています。ワックスや毛抜きによる処理は肌を痛め、照射できなくなるため避けてください。照射された毛は自然と抜け落ちていきますので、無理に引き抜かないようにしてください。

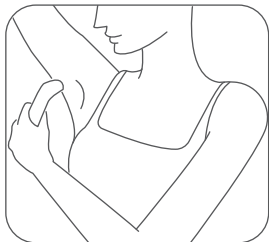


STEP 01

カミソリできれいに除毛します。

※除毛クリーム、毛抜きは使用しないでください。

※脱毛ジェルを使用する必要はございません。硬度と工学的に優れた人工サファイヤを採用しており、肌を十分に冷やし肌を保護することが出来ます。

ご使用方法

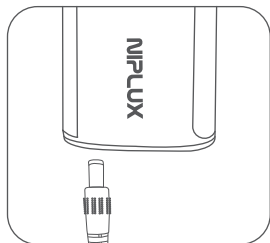


STEP 02

ACアダプターを本体のコード差込口に接続し、コンセントに差し込む。
電源ボタンをタッチして電源を入れる。(Ⓜ)



放熱口

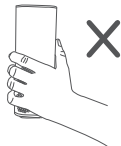

使用時は放熱口を手で覆わない
ください。内部の熱が上手く放
出されず、内蔵ファンが破損して
製品の寿命が短くなります。




STEP 03

使用する際に、保護グラスをつける。

※本器は非常に強い光が連続的に発光します。
保護グラスを着用の上、照射口を直視しないでください。

ご使用方法

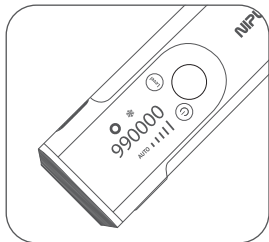

STEP 04


照射レベルを設定する。(Level)



※照射レベルは肌に照射されるIPL光エネルギーの強さの事です。


※1回の使用で同じ部位に何度も照射しないでください。

※肌に異常がある場合や肌が敏感な方は使用しないでください。

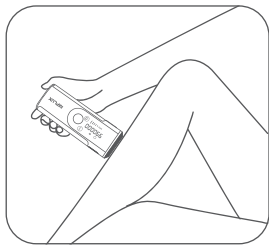

STEP 05

照射口は肌に対して垂直に、照射口全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。

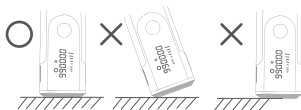

照射口の一部が肌に当たってなかったり、斜めになっていると、照射されません。

ご使用方法

目を守る為、保護グラスを装着するか目を閉じてご使用ください。



手動で照射する場合

- 照射口を肌にしっかり当てます。P17参照
- 照射可能状態になると(O)が表示され、肌が正しく検知されると、LED画面が点滅します。
- この状態になると照射ボタンを押してフラッシュを照射することができます。



自動連射の場合

- 照射口を肌にしっかり当てます。P17参照
- 照射可能状態になると(O)が表示され、肌が正しく検知されると、フラッシュを照射します。
- 自動連射の場合、肌が正しく感知すると照射ボタンを押さずにフラッシュを照射することができます。

※初めて使用する方や肌が弱い方は照射レベル1からご使用ください。

照射後は必ず保湿を行ってください

顔の保湿方法

照射を行ったあとの顔の肌はとてもデリケートです。顔は体の中でも皮膚が薄く、毛細血管の色が透けて赤ら顔になったり、クマができやすくなったりします。そのため、顔は肌のなかでも特に優しくお手入れをしなければなりません。顔の皮膚は薄いため、いったん水分補給をさせても水分がなくなってしまいやすい場所です。顔への照射後は、化粧水のほかに適度な油分をもつ乳液やクリームを併用して、水分を肌に閉じ込めるお手入れを行うと良いでしょう。

※美白化粧品やビタミンAが含まれた化粧品のご使用はお控えください。

体の保湿方法

顔に比べると皮膚が厚い部分が多いですが、常に衣服とこすれたり、場所・季節によっては紫外線や外気にさらされ、ダメージを受けやすい部位です。照射をする場所によりますが、腕や足などはボディローション等を使って特に念入りな保湿を行いましょう。照射直後は肌が敏感になっているため、当日はシャワーのみ、肌への刺激を減らすためにぬるめのお湯を使うと良いでしょう。また、ボディタオルは使わず、しっかりとボディソープを泡立てて手のひらで優しく体を洗うと、刺激を抑えることが出来ます。ひりひりするという場合はしっかりと保湿を行ってから、保冷剤等でクールダウンさせると痛みを軽減できます。

※肌に異常を感じた場合や、2日経っても症状が続く場合は皮膚科医にご相談ください。

照射後は必ず保湿を行ってください

VIOの保湿方法

痛みを感じやすいVIO部分は、照射後特に注意しなくてはならない部位です。

下着の締め付けやこすれが刺激になったり、汗をかいて不衛生になったりするため、ぬるめのシャワーで清潔に保つようにしてください。アンダーヘアは他の部分のムダ毛に比べて太く、肌へのダメージも大きくなります。シャワー後は優しく水分をふき取ってから、しっかりと保湿を行きましょう。

敏感肌用のローションや、やわらかいクリームなど刺激の少ないアイテムを使うのがおすすめです。

照射後のケア

- 照射後の肌は、非常にデリケートな状態になっています。しっかりと保湿を行い、必要に応じて保冷剤で冷却するなどケアを行ってください。
- 照射後に外出する場合は、必ずSPF30++以上の日焼け止めを塗り日焼けしないようにしてください。

お手入れ・保管方法

- ①お手入れする際は電源ボタンを長押しして電源を切り、プラグを抜いた状態で行ってください。
- ②本体・付属品のお手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
※汚れがひどい場合は、水を含ませた布を浸してよく絞り、優しく汚れをふき取って下さい。その後、乾いた布で拭いてください。※防水ではありませんので、水洗いはしないでください。
- ③清潔に保つため、収納ケースに入れゴミやホコリがつかないように保管してください。
火気の近くや高温多湿の場所、直射日光を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

包装の捨て方及び製品破棄時

本製品を破棄する際は自分で分解せず、自治体の分別ルールに従って破棄してください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	SILK SKIN (シルクスキン)
定格電源	DC 12V 3A
消費電力	約36W
電源供給元	12V 3A ACアダプター
セット内容	本体×1 / 保護ガラス×1 / シェーバー×1 / ACアダプター×1 収納ケース×1 / 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約177×64×37mm
化粧箱寸法	約232×237×88mm
重量	本体:約249g
製品素材	本体:ABS+PC / 収納ケース:EVA / パッケージ:紙
生産国	中国