

NIPLUX

EMS HEAD SPA

ニップラックスEMSヘッドスパ

取扱説明書

保管用
保証書付


このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。



NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは
こちらのQRコードから (www.niplux.jp)



操作方法動画

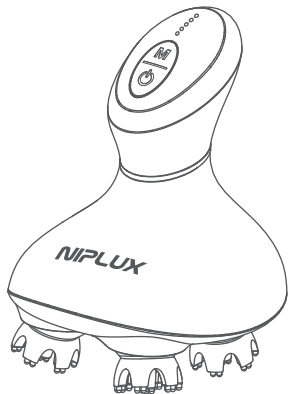

目次

安全上のご注意	03
各部の名称	14
ご使用の前に	16
操作方法	19
ご使用方法	23
オシログラム	28
お掃除のしかた	29
保管のしかた	31
商品仕様	32
故障かなと思ったら	33
無償保証規定	35
保証書	36

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。

異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

安全上のご注意

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。



警告



禁止

下記のような場合や部位には使用しない。

事故や肌・身体トラブルの原因になります。

●整形手術をした部位 ●皮膚炎・過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合およびその部位 ●頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位 ●かゆみやほてりのある部位 ●膨らんだほくろ・ウイルス性のイボのある部位 ●のどぼとけ・鼻・耳・唇・眼球・まぶた・目のまわり・口内・陰部・粘膜など ●心臓の周辺部位 (みぞおちまわり) ●生理中の腹部 ●当日脱毛処理をした部位 ●金属、シリコン等を埋め込んである部位 ●刺青(タトゥー)を入れている部位 ●飲酒後や疲労の激しい場合

次に該当する方は使用しない。

髪の毛が絡みつき、髪を傷める原因になります。

●植毛をしている方

●部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の方

乳幼児やペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。



警告



禁止

次のような方は使用しない。

下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談のうえご使用ください。
事故や肌・身体トラブルの原因になります。

●アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方 ●アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ●シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方 ●急性疾患の方、悪性腫瘍のある方、感染症疾患の方 ●麻痺および知覚障害の方 ●洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方 ●出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方、高血圧の方 ●眼の病気・治療歴のある方 ●薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方 ●結核性疾患・内臓疾患のある方 ●骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方 ●神経障害・皮膚知覚障害のある方 ●自意識表示が出来ない方や操作が行えない方 ●安静を必要とする方、四肢の不自由な方 ●心臓疾患のある方、血栓のある方 ●体調が優れない方 ●骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術をした方 ●医師からマッサージを禁じられている方 ●医療機関で治療中の方 ●発熱（38℃以上）している方 ●妊娠中の方、生理中の方、出産直後の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）



警告



禁止

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。
ケガや本体が故障する原因になります。



必ず守る

使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、
ただちに使用を中止し、医師に相談する。
医師に相談のうえ指示に従ってください。

子供や身体の不自由な方だけの使用は避ける。
未成年者は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。
また、子供の手の届かない場所に保管する。
事故やケガの原因になります。

初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。
使いはじめや慣れるまでは、必ずEMSレベル1、低速モードから使用する。
事故やケガをする原因になります。慣れてからレベルを調整してください。



警告



必ず守る

1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に使用する。
頭皮に使用するときには、頭皮全体で合計5分以内を目安に使用する。
製品の過度の使用は肌を傷める原因になります。また、髪が乾いた状態で長時間使用すると髪が絡みつく原因になります。万が一髪が絡みついたときは、本体を停止させてから髪の毛を外してください。

顔に使用する時はフェイス用アタッチメントを使用する。
肌を痛める原因になります。

顔に使用する時は、必ずメイクを落として使用する。
メイクが崩れたり、肌トラブルの原因になります。



禁止

動作中にアタッチメントの間に指などを入れない。
ケガをする原因になります。

使用時には本体を強く押しあてたり、早く動かしたりしない。
過度に1カ所に集中して使用しない。
ケガや本体が故障する原因になります。痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。



警告



必ず守る

必ず全てのアタッチメントを取り付けた状態で使用する。
ケガをする原因になります。

金属・アクセサリ類(ネックレス・イヤリング等)は外してから使用する。
事故やケガの原因になります。

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、
部位をずらして使用する。また、常に肌がしっかりと保湿された状態で使用する。
そのまま使用すると、頭皮や肌を痛める原因になります。

歯の治療を受けている方は、使用を控えるか部位をずらして使用する。
歯の治療中は、頬やあごに刺激を強く感じたり不快に感じる場合があります。
強い違和感を感じる場合は医師にご相談ください。



禁止

オイル、スクラブなど刺激の強いものは使用しない。
肌トラブルや故障の原因になります。

EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。
レベルは少しずつ調整してください。



警告



禁止

ACアダプターや充電コードについて

●傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●ぬれた手で抜き差ししない。

感電やショート、発火の原因になります。



必ず守る

交流100V~240Vで使用する。

海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

火災・感電・故障の原因になります。

本製品には必ず付属の充電台、ACアダプターを使用する。充電コードは付属品または同じタイプ (type-C) のものを損傷がないか確認したうえで使用する。故障や事故の原因になります。

本体および充電台の充電端子に水が付着してないことを確認してから充電する。感電やショートによる火災の原因になります。



警告



禁止

使用中は金属や他の電気製品に接触させない。
ケガや本体が故障する原因になります。

浴室内では絶対に充電しない。
付属品は防水仕様ではありません。感電やショートによる火災などの原因になります。



必ず守る

本体を使用しないとき・掃除するときは必ず電源を切る。
充電台を掃除するときは必ずACアダプターをコンセントから外す。
感電やショートによる火災などの原因になります。

コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずACアダプターを持つ。
感電やショートによる火災などの原因になります。

本体、付属品に次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し
本体の電源を切る。充電中の場合はコンセントからACアダプターを抜く。
破損や発火、事故やケガの原因になります。
●異音●異臭●異常発熱●けむりが出る など



警告

 禁止	本体及び付属品端子にピンやゴミ、ほこりなどを付着させない。 感電やショートによる火災などの原因になります。
	不安定な場所に置かない。 また、本体や付属品を落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が故障する原因になります。
	高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内)や埃のある場所で 保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。
	本体を水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。 本体はIPX7の防水仕様であり、完全防水ではありません。故障の原因になります。
 分解禁止	分解や修理・改造はしない。 火災・感電・ケガの原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。




警告

 禁止	ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形・故障の原因になります。
	本体および付属品をアルコール・ベンジン・シンナー・除光液などの 溶剤で拭かない。 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
	入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万が一浸けてしまった場合は、 水で十分に洗い流す。サウナなど高温多湿になる場所では使用しない。 においや変色・故障の原因になります。
 必ず守る	使用後は必ず本体の水分をしっかりと拭き取る。 また、浴室など高温多湿の場所に放置せず湿気の少ないところに保管する。 本体がぬれたままの状態では放置すると、充電端子が腐食する原因になります。
	シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず本体を水洗いする。 本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因になります。

各部の名称

本体

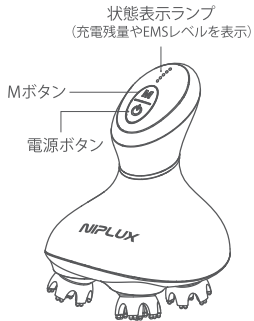

本体・裏

頭皮 & ボディ用
アタッチメント (4個)




LEDランプ

可動部
アタッチメントを
外したところ



各部の名称

充電台

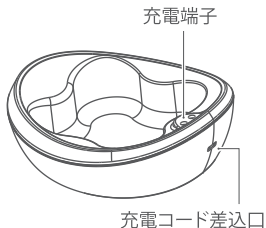

付属品



×4個

頭皮&ボディ用
アタッチメント
(本体にセット済み)



×4個

リフトケア用
アタッチメント



×4個

フェイス用
アタッチメント



掃除用ブラシ



ACアダプター



USB充電コード
(type-c)



取扱説明書兼保証書

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

※本体は防水仕様になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま使用しないでください。

※充電台、充電コード、ACアダプターは防水ではありません。

※水がかからない場所で保管し、ぬれた状態での充電や、浴室内での充電は絶対にしないでください。

ご使用前に

充電方法

初めてご使用されるときや充電残量が減ったとき(5つの状態表示ランプが同時に3回点滅時)は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

お願い

必ず本体・アタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。
充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約4時間	約3時間

※充電推奨温度は15℃～35℃です。


推奨温度外では充電時間がのびたり、充電出来ない場合があります。

※電池の残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は大きく前後します。

ご使用の前に


1 付属の充電台、充電コード、 ACアダプターを右図のように接続する。

※端子の形が一致するように、
ゆっくりと根元まで押し込んでください。

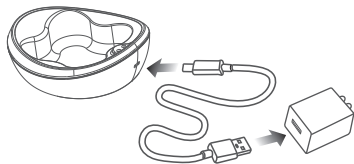

2 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。


※充電する際は、付属のACアダプターを使用してください。
※充電中は本体の電源をオンにしないでください。

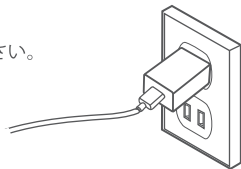

ご使用の前に

3 本体の充電端子が、充電台の充電端子に触れるように置く。

※充電時、状態表示ランプが1から順に点灯します。

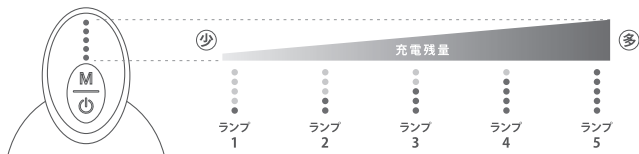

4 充電完了後、ACアダプターを壁面コンセントから抜く。

※状態表示ランプが5つ全て点灯したら充電完了です。

操作方法

●4つの機能

回 転

振 動

EMS

LED

●ボタン操作一覧

	 電源ボタン	M モードボタン
長押し	電源オン/オフ	振動オン/オフ
短押し	回転モード切替	EMS強さレベル切替
すばやく2度押し	LEDオン/オフ	—

操作方法

1 電源ボタンを長押しして電源を入れる。

※ 電源ボタンを約2秒長押しして電源をオンにしてください。低速回転モード・LEDオンが開始します。

※使用中に本機を停止させたい場合は、電源ボタンを長押しして電源をオフにしてください。

本機は10分間連続稼働すると自動的に電源がオフになります。

2 Mボタンを短押ししてEMS強さレベルを選ぶ。

※EMSオフとEMS強さレベル1～5が選択可能です。Mボタンを短押しするたびにEMS強さレベルが切り替わり、状態表示ランプがレベルに応じて順に点灯します。(白色点灯)

初めてご使用になる方はレベル1からご使用ください。慣れたら徐々にレベルを上げ、お好みのレベルでご使用ください。


ランプ0	ランプ1	ランプ2	ランプ3	ランプ4	ランプ5
					
EMS オフ	レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	レベル 5

※EMSオフ時、ランプは点灯しません。

操作方法

3 電源ボタンを短押しして回転モードを選ぶ。

※電源ボタンを短押しするたびに回転モードが以下の順で切り替わります。EMSオン・オフで回転の種類が異なります。
電源を入れたら「①低速回転」からスタートします。

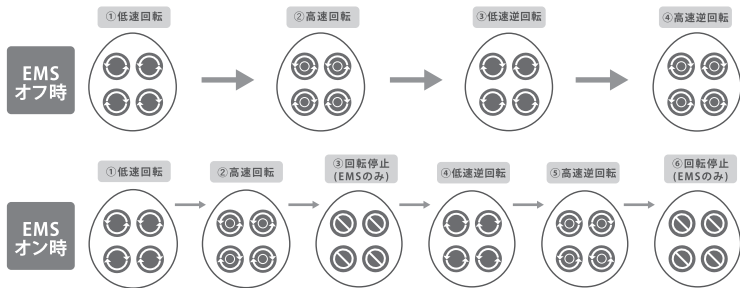


※EMSの操作方法はp.20をご参照ください。

操作方法

4 電源ボタンをすばやく2度押ししてLEDモードを選ぶ。

※電源ボタンをすばやく2度押しするたびに
赤色LEDモードのオン/オフが切り替わります。
EMSでアプローチしたお肌に、赤色LEDを照射
することで頭皮から全身まで集中ケアが可能です。

赤色LED

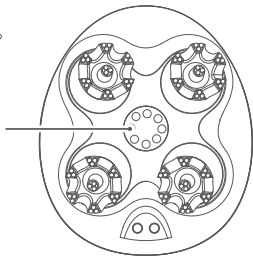

5 Mボタンを長押しして振動モードを選ぶ。

※Mボタンを長押しするたびに振動モードのオン/オフが切り替わります。
※振動レベルは1種類のみです。

ご使用方法

■アタッチメントの種類



頭皮・ボディ用


頭皮や全身ケアに



リフトケア用^{※1}

お肌のリフトケアに^{※1}

※1…機器を上にあてて動かすこと

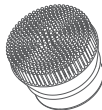

フェイス用

洗顔用に

すべてのアタッチメントでEMSモードをご使用いただけます。

ご使用の際は、お肌に軽くあてるように使用し、強くあてないでください。

※EMSモードをご使用の際は、水やジェルで地肌を保湿するとよりEMSを感じやすくなります。

※目・口・鼻の周り、のどぼとけ、粘膜などのデリケートな部分は避けてご使用ください。

※クレンジングや洗顔スクラブは使用しないでください。故障や肌のトラブルの原因になります。

※本機は防水仕様となっておりますが、本体を浴槽の中（水中）に入れての使用はしないでください。

※アタッチメントはカーボン素材の導電性シリコンを使用しているため、ご使用時に黒く色落ちする場合がございます。

色移りを防止するためお洋服の上からは使用しないようご注意ください。また、お肌に強くあてると黒く色移りする場合がございますので、優しくあててご使用ください。ご使用初期は可動部から染み出した潤滑油が黒く着色した状態になることがございますが、ご使用には問題ございません。その都度ふき取ってご使用ください。

ご使用方法

■頭皮・ボディ用アタッチメントご使用例 ※使用推奨水温は5℃～42℃です。



- 1 シャンプーで髪全体を泡立てる。
※乾いた髪でも、頭皮ケアやリラクゼーションとしてお使いいただけますが、長時間のご使用は髪の毛が絡みつく原因になります。



- 2 本体をしっかりと持つ。
※本体落下防止のため、手についたシャンプーを洗い流して持ってください。
本体が滑って落ちると、ケガ・故障の原因になります。



- 3 電源ボタンを長押しし電源をオンにして、
回転と振動モードを選択する。

ご使用方法

4 生え際に軽く押しあて⇒矢印の方向にすべらせる。

- ①生え際に約5秒間軽くあてる。
- ②生え際から矢印の方向へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。

●押しあてる⇒矢印の方向にすべらせる

\\ おすすめモード //

回転+振動モードで集中毛穴ケア



前頭部と側頭部をケア



後頭部をケア



頭頂部と後頭部をケア

※①、②を2回ずつ繰り返します。軽くあてるようにし、絶対に強くあてないでください。

※頭皮全体で5分以内を目安に使用してください。

※シャンプーをしたままの長時間のご使用は髪のパサツキの原因にも繋がります。

5 回転を止めてEMSモードに切り替え、生え際に軽く押しあて⇒矢印の方向にすべらせる。

- ①生え際に約5秒間軽くあてる。

\\ おすすめモード //

EMSモードで頭皮を刺激



ご使用方法

■ブラシの正しいあて方



6 電源ボタンを長押しして電源をオフにする。

※使用後、本体を清潔に保つために毎回お掃除をしてください。

詳しくは、P30の「お掃除のしかた」をご参照ください。

7 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れ(トリートメントなど)をする。

ご使用方法

■リフトケア用アタッチメントご使用例 ※1

※1…機器を上にかかすこと

フェイス
ライン



あごから耳に向かってゆっくりと
掴むように動かす。

おでこ
こめかみ



生え際やこめかみを円を描くように、
ゆっくりと持ち上げる。

耳下・首



耳の下から鎖骨に向かって
流すように動かす。

※顔に使用する時はフェイス用アタッチメントをご使用ください。

※メイクを落とし、素肌の状態でご使用ください。

※目や口のまわり、鼻、耳、のど仏は使用しないようご注意ください。

※摩擦の原因となるため、お肌は十分に水などで保湿した状態でご使用ください。

※必ず低速モードでEMSレベルは弱めの状態でご使用ください。

\\ おすすめモード //

回転+振動モードでケアした後、
EMSモードで気になる部位を集中ケア

ボディ
ケア

頭皮・ボディ用、リフトケア用アタッチメントは足や腕などお身体のケアにもご使用いただけます。

ご使用方法

■フェイス用アタッチメントご使用例



洗顔時に、泡立てた洗顔料をお顔にたっぷりと塗布し、回転モードでお顔に軽くあてる程度でご使用ください。その他、デコルテや首筋などお肌の柔らかい部分にご使用ください。

※お顔中心はデリケートな部分が多いため、低速回転、EMSレベル1または2でご使用いただき、無理にレベルを上げないでください。

∞ おすすめモード ∞ 洗顔後オイルフリーの化粧水でしっかりと保湿しEMS+LEDモードで集中ケア

オシログラム


■EMSモード(0Hz-200Hz)



お掃除のしかた

- 1 電源がオフになっていることを確認する。
- 2 本体についている髪の毛や汚れを水で洗い流す。
- 3 本体からアタッチメント(4つ)を取り外す。(図1参照)

※注意:アタッチメントが破れないようにやさしく取り外してください。

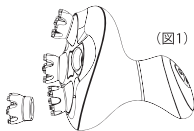


- 4 付属の掃除用ブラシを使って各部の汚れを落とした後、水で洗い流す。

※図2、3のように本体の可動部、アタッチメントなどを掃除してください。

※汚れが取れにくい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

※ご使用初期は可動部から染み出た潤滑油が、アタッチメントの色落ちにより黒く着色した状態となることがございますがご使用には問題ございません。その都度ふき取ってご使用ください。

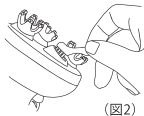

お掃除のしかた

- 5** タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメント・アタッチメント裏のネジの水分を拭き取り、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させる。

※特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。

※湿ったままの状態で充電台にのせたり、放置したりしないでください。

においや変色・故障の原因になります。

- 6** 本体・アタッチメントが乾燥したら、アタッチメントを本体に取り付ける。

※注意：アタッチメントが破れないようにやさしく取り付けてください。

保管のしかた

- 使用後は、必ず本体およびアタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。充電が完了したらそのままにせず、本体を充電台からはずし、風通しの良い所で保管してください。
※濡れた状態で放置すると充電端子に錆が発生する恐れがあります。
ご使用方法をお守りいただかずに錆が発生した場合は、保証の対象外となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターや充電コードをコンセント等から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。

商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)	セット内容	本体×1 / 充電台×1 頭皮 & ボディ用アタッチメント×4 (本体セット済み) リフトケア用アタッチメント×4 フェイス用アタッチメント×4 掃除用ブラシ×1 USB充電コード×1 / ACアダプター×1 取扱説明書兼保証書×1
品名	EMS HEAD SPA(EMSヘッドスパ)		
定格電源	DC 5V 2A		
消費電力	約8W(充電時)	本体寸法	約130×110×150mm(充電台を含む)
防水仕様	IPX7(本体)	化粧箱寸法	約156×144×185mm
電池容量	1200mAh	重量	本体:約348g / 充電台:約82g
電源供給元	ACアダプター / モバイルバッテリー	使用環境	環境温度0℃-40℃ 相対湿度≤80%RH
製品素材	本体:ABS樹脂、シリコン、PC アタッチメント:シリコン 充電台:ABS樹脂	生産国	中国

故障かなと思ったら

Q.充電ができません

- 出力電圧が強すぎる可能性があります。ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
(スマートフォンなどの急速充電は出力が強すぎるため、故障の原因になる可能性があります。)
- 充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
- 充電口に付着物がないか確認してください。充電端子に汚れがないか確認してください。汚れがあればふき取って再度充電をお試しください。
- 本体の電源がオンになってないか確認してください。充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

Q.停止できません

- 電源ボタンを2秒ほど長押ししてください。

Q.異音がします

- アタッチメントがしっかり装着できているか確認してください。
- 付属のブラシを使用し、アタッチメント内部を清掃してください。

故障かなと思ったら

Q.回転・振動が反応しません

- 充電が不足している可能性があります。充電を満タンにして再度お試しください。

Q.EMSを感じません、ピリピリします

- お肌が乾燥している、またはしっかり密着していない可能性があります。しっかりお肌を保湿し(オイルは電気を通さないため使用しないでください)、ブラシ全体が頭皮にあたっているか確認してください。

Q.使用中に肌が黒くなりました、黒いオイルが出てきます

- アタッチメントはカーボン素材の導電性シリコンを使用しているため、ご使用時に黒く色落ちする場合がございます。色移りを防止するためお洋服の上からは使用しないようご注意ください。また、お肌に強くあてると黒く色移りする場合がございますので、優しくあててご使用ください。ご使用初期は可動部から染み出した潤滑油が黒く着色した状態になる場合がございますが、ご使用に問題はございません。その都度ふき取ってご使用ください。

●破棄について

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄される際は自分で分解せず、自治体の分別ルールに従って適切に廃棄してください。

