


NIPLUX EMS LIFT BRUSH

ニップラックス EMSリフトブラシ

保管用

保証書付

取扱説明書

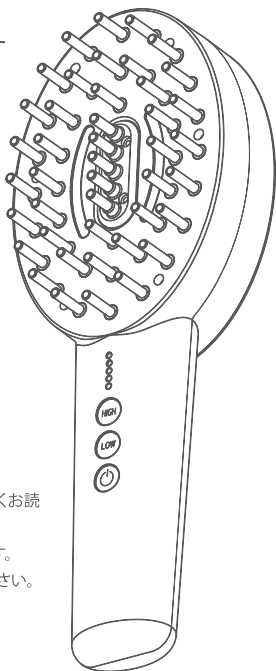

このたびは本製品をお買上げいただき、
誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読
みになり、正しく安全にお使い下さい。
この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。



公式サイト



操作方法動画

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ
www.niplux.jp

目次

安全上のご注意	03
各部の名称とはたらき	10
充電方法	11
ご使用前の注意事項	13
操作方法	14
使用方法	16
お手入れ方法	19
保管方法	20
商品仕様	21
故障かなと思ったら	22
無償保証規定	23
保証書	24

安全上のご注意



定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。

異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。



故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。




■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。




■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。
 必ず守る	実行しなければならない内容。




警告

 <p>禁止</p>	<p>次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。 医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">●ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器●人工心肺など生命維持用医用電子機器●心電計などの装着型医用電子機器
 <p>必ず守る</p>	<p>次のような方は医師と相談して使用する。 事故や肌・身体のトラブルの原因になります。下記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。</p> <ul style="list-style-type: none">●悪性腫瘍のある方●心臓疾患、急性疾患、感染症疾患のある方●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方●薬を服用中の方●妊娠中の方、出産直後の方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●体調が優れない方●発熱している方●医療機関で治療中の方●かつて治療や手術を受けたところ(美容医療施術を含む)、または疾患部へ使用する方●体力が極端に衰えた方●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方●神経障害、皮膚知覚障害のある方●アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方●自己免疫疾患のある方
 <p>禁止</p>	<p>下記のような場合や部位には使用しない。 事故やケガ、肌・身体のトラブルの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">●骨折をした部位●皮膚炎、過度の日焼けなどお肌に異常がある場合およびその部位●傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある場合およびその部位●かゆみやほてりのある部位●膨らんだほくろ、ウイルス性のイボのある部位●のど、眼球、まぶた、目のまわり、口内、陰部、粘膜など●生理中の腹部●当日脱毛処理をした部位●金属、シリコン等を埋め込んである部位●刺青(タトゥー)を入れている部位●飲酒後や疲労の激しい場合

警告

 禁止	<p>乳幼児やペットには使用しない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。</p>
	<p>次に該当する方は使用しない。 髪の毛が絡みつき、髪を傷める原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">●植毛をしている方●部分かつら(テープ貼り付け、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の方
	<p>他の低周波/高周波医療機器、その他ドライヤー等電化製品と同時に使用しない。 事故やケガの原因になります。</p>
 必ず守る	<p>子供や身体の不自由な方だけでの使用は避ける。 未成年者は保護者同意の上、保護者監視のもと使用する。 また子供の手の届かない場所に保管する。 事故やケガの原因になります。</p>
	<p>歯の治療中の方や歯に詰め物(金歯、銀歯など)がある方は使用を控えるか部位をずらして使用する。 歯の治療中の方は、頬や顎に強い刺激や不快感に感じる場合があります。強い違和感を感じる場合は医師にご相談ください。</p>
	<p>使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら直ちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談の上、指示に従ってください。</p>
 禁止	<p>充電コードは ●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。 ●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させない。 ●収納時に本体などに巻きつけない。 ●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。 ●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。 ●傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。</p>
	<p>感電やショート、発火の原因になります。</p>

警告

 禁止	<p>充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。</p>
	<p>定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。 電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。</p>
	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。 ケガや本体が故障する原因になります。</p>
 必ず守る	<p>交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。 火災、感電、故障の原因になります。</p>
	<p>本体、付属品に次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し本体の電源を切る。充電中の場合はコンセントからACアダプターを抜く。 ●異音●異臭●異常発熱●けむりが出る など 破損や発火、事故やケガの原因になります。</p>
	<p>本体を使用しないとき、掃除するときは必ず電源を切る。 感電やショートによる火災などの原因になります。</p>
	<p>充電コードは付属品または同じタイプ(type-c)のものを損傷がないか確認したうえで使用する。 故障や事故の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理・改造はしない。 火災、感電、ケガの原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>

警告



禁止

本体及び付属品端子にピンやゴミ、埃などを付着させない。
事故やケガ、体調不良の原因になります。

不安定な場所に置かない。
また本体や付属品を落としたりぶつけたりしない。
ケガや本体が故障する原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内)や
埃のある場所で保管、使用しない。加熱したり、火中に投下
しない。
事故や部品の変形、故障の原因になります。



使用中は金属やほかの電気製品に接触させない。
ケガや本体が故障する原因になります。

ドライヤーやファンヒーターなどで
本体や付属品を乾燥させない。
ケガや本体が故障する原因になります。

本体及び充電コードに水につけたり、
浴室など湿気の多い場所や屋外で使用したりしない。
濡れた手で持たない。
本製品は防水仕様ではありません。
フェイスパックをしながらのご使用や濡れた髪へのご使用は可能で
すが、柄を濡れた手で持ったり浴室で使用したりしないでください。

本体及び付属品をアルコール、ベンジン、シンナー、除光液
などの溶剤で拭かない。
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

警告

 禁止	<p>本体のピンを下にして置かない。 ピンを傷つける原因になります。</p>
 必ず守る	<p>本体(特にピン部分)や付属品に 破損がないことを定期的に確認する。 事故やケガの原因になります。 破損等異常がある場合は使用しないでください。</p>
	<p>金属、アクセサリー類(ネックレス・イヤリング等)は 外してから使用する。 事故やケガの原因になります。</p>
	<p>肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げ たり、部位をずらして使用する。また常に肌がしっかり保湿さ れた状態で使用する。 そのまま使用すると、頭皮や肌を傷める原因になります。</p>
	<p>顔に使用する時は、必ずメイクを落として使用する。 メイク崩れや肌トラブルの原因になります。</p>
	<p>初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。 使い始めや慣れるまでは必ずレベル1、短時間から使用する。 事故やケガの原因になります。慣れてからレベルを調整してください。</p>
	<p>1部位1回5分以内、1日合計10分以内を目安に使用する。 連続使用はせず、少なくとも5時間は間隔を開ける。 過度の使用は肌を傷める原因になります。頭皮に使用するときは、 頭皮全体で合計5分以内を目安に使用してください。</p>

警告



禁止

スクラブなど刺激の強いものは使用しない。
肌トラブルや故障の原因になります。


EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。
レベルは少しずつ調整してください。

HIGHモードで顔や身体に使用しない。
HIGHモードは頭皮のみに使用してください。
顔に使用するときはLOWモードのレベル1~3を選択してください。


使用時には本体を強く押し当てたり、早く動かしたりしない。
過度に1ヵ所に集中して使用しない。
ケガや本体が故障する原因になります。痛みや異常を感じた時は、
すぐに使用を中止してください。

各部の名称とはたらき

本体

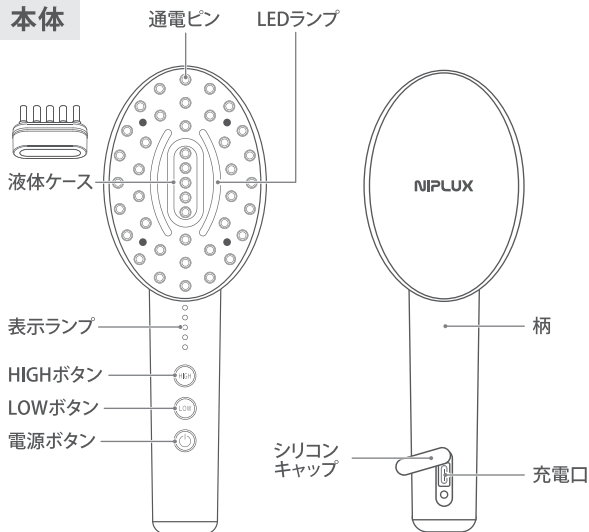

液体ケース

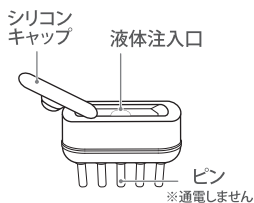

付属品



取扱説明書兼保証書

充電方法



初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。


- 1 | 付属の充電コードのType-Cコネクター側を本体の充電口に接続する。
- 2 | 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込む。
- 3 | 充電中、充電残量に応じて順に表示ランプが点灯し、5つ全て点灯すると充電完了。
- 4 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外す。

※充電中は本体の電源をオンにしないでください。

※5V2A以下のACアダプターから充電してください。

5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。

※ACアダプターは付属していません。

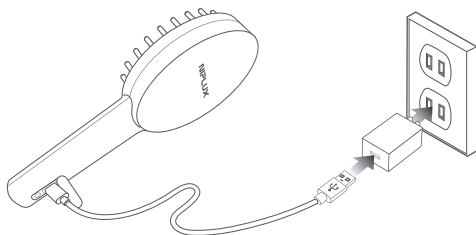

LED5 ●
LED4 ●
LED3 ●
LED2 ●
LED1 ●



多
充電
残量

少

■表示ランプについて

充電が無くなると、電源が自動オフします。
充電残量は充電したときの表示ランプの点灯数で確認してください。

充電方法

■ 充電時間の目安


充電時間	動作時間
約2.5時間	約70分

※ 電池残量や使用環境、使用するレベルやモードによって充電時間や動作時間は大きく異なります。

■ 充電池について

- ・充電コードを差したまま使用できません。
- ・充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

ご使用前の注意事項

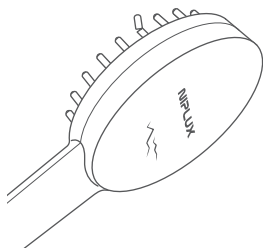

破損・傷がないか確認

- ご使用前にピンの先端に破損や傷が無いか確認してください。破損や傷がある場合は、お肌を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- ご使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- ご使用前にアクセサリ等金属類は外してください。
- お肌や頭皮に異常がないかよく確認してからご使用ください。
- 本製品は防水ではありません。濡れた手で持ったり、浴室で使用したりしないでください。

！ 注意 ● NOTICE

EMSの感じ方は個人差があります。万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は直ちに使用を中止してください。


操作方法

1 | お好みで液体ケースに美容液を入れる

液体ケースのピンを持ってケースを取り外し、裏側の注入口からお好みの頭皮用美容液やオイルを入れ、シリコンキャップをしっかりと閉めてからピンの先端を軽く押して液体が出るかご確認ください。その後ケースを本体に取り付けてください。

※酸性液体、粉末入り液体、乳液などの粘度の高い液体は使用できません。


※液体ケースのピンは通電しません。

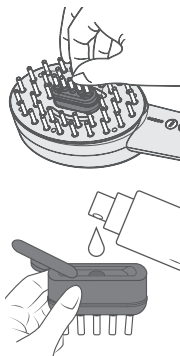

2 | 電源ボタンを長押しして電源をオンにする


電源がオンになるとHIGHモード・レベル1・振動オンで動作を開始します。

電源を入れてから、約10分後に自動停止します。途中で電源を切る場合は、電源ボタンを長押ししてください。

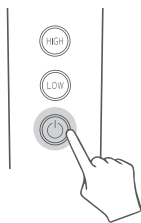


3 | 電源ボタンを短押しして振動オン/オフを切り替える

電源ボタンを短押しするたびに振動オンとオフが交互に切り替わります。

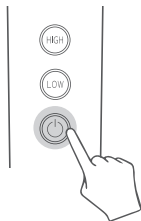

操作方法

4 | HIGH/LOWボタンを短押ししてモードやEMSレベルを切り替える

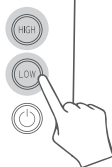

■各機能と操作方法

モード	LED	周波数	EMSレベル1~5	EMSオフ
HIGHモード (頭皮ケアモード)	赤色 点灯	20Hz	短押し	長押し
LOWモード (フェイス・ボディケアモード)	青色 点灯	20~100Hz	短押し	長押し

モードを切り替える度にEMSレベルは1にリセットされます。
選択中のレベルは表示ランプの点灯数で確認できます。
赤色・青色LEDでさらにお肌をケアします。

※振動オフ状態の場合、モードを切り替える度に本体が一瞬振動します。


※HIGHモード(頭皮ケアモード)は顔や身体には使用できません。

※初めて使用する時や慣れるまでは、レベル1からご使用ください。

※赤色・青色LEDはお肌を温めたり冷却したりする機能ではありません。

5 | 電源ボタンを長押しして電源をオフにする

約10分使用後、自動的に電源がオフになります。
使用後はP19のお手入れ方法に従って、必ずお手入れを行ってください。

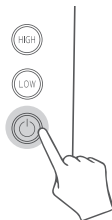

使用方法

1 | 頭皮やお肌を清潔にし、 化粧水やミストで保湿する

お顔に使用する場合は、必ずメイクを落としてからご使用ください。

お肌が乾燥しているとEMSを感じにくい場合や、ピリつきを感じる場合があります。必ず保湿を行ってからご使用ください。

※本製品は防水ではありません。柄を濡れた手で持ったり、浴室で使用したりしないでください。



2 | HIGHモード(頭皮ケアモード)で 頭皮をケアする

※HIGHモードは頭皮以外には使用できません。

※振動のみ使用したい場合は、HIGHを長押ししてEMSオフにしてください。



生え際に沿って細かく左右に動かす



生え際から毛流れに沿って髪をとかすようにゆっくりと動かす

■ ブラシの正しいあて方



ブラシ全体が頭皮にあたっている



ブラシの一部が頭皮から浮いている

使用方法

3 | LOWモード(フェイス・ボディケアモード)で 顔や身体をケアする


※振動のみ使用したい場合は、LOWを長押ししてEMSオフにしてください。

フェイスクア

お好みでフェイスパックをしながらご使用ください。



フェイスラインに沿って
あごから耳に向かって
ゆっくりと動かす

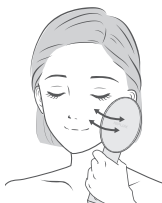

頬の内側から外側に向
かってゆっくりと動かす




生え際に沿って
おでこから耳に向かって
ゆっくりと動かす



- ※まぶたや目の周りには使用できません。
- ※ピン全体がお肌に当たるようにして動かしてください。
- ※お顔は特にデリケートな部位のため、必ずレベル1~3でご使用ください。また、強く押しあてないようご注意ください。
- ※柄を濡れた手で持ったり、浴室でご使用したりしないでください。


使用方法

ボディケア

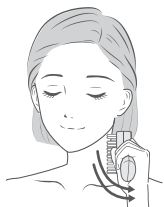


首のラインに沿って耳下から肩に向かってゆっくりと動かす


※のどに当てないようにご注意ください。

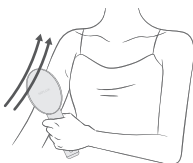

腕や足の下から上に向かってゆっくり動かす

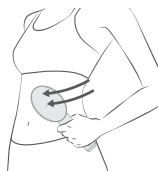

お腹の外側から内側に向かってゆっくりと動かす

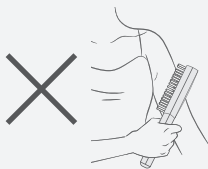


※安全上のご注意をよく読んで、使用できない箇所を確認した上でご使用ください。

※ピン全体がお肌に当たるようにして動かしてください。

お手入れ方法


- 液体ケースを使用した場合は下記の手順でお手入れを行ってください。
 - ①中の液体を捨てて水洗いする。
 - ②注入口を下に向けて、水気を振り落とす。
 - ③水滴を拭き取り、シリコンキャップを開けたまま風通しの良い日陰で自然乾燥させる。※ドライヤー等で乾かさない。
 - ④十分乾いたら、シリコンキャップを閉めて本体に装着する。

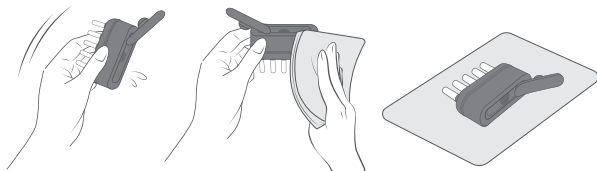

- 本体（液体ケースを除く）及び充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ひどい汚れや本体ピン側に付着した美容液等は、ぬるま湯を薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞って拭き取った後、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しないでください。

保管方法

- ピンを下にして置かないでください。ピンを傷つける原因になります。

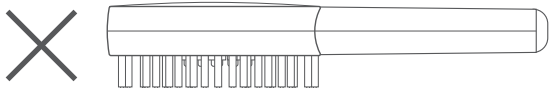

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	NIPLUX EMS LIFT BRUSH(ニップラックス EMS リフト ブラシ)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約12.5W(充電時)
電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
セット内容	本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1
電池容量	450mAh
本体寸法	約250×90×55mm
化粧箱寸法	約271×116×65mm
重量	本体:約200g
使用環境	環境温度 5℃~40℃ / 相対湿度≤80%RH
製品素材	本体:ABS、ステンレス、PC、シリコーン
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物がないか確認してください。
	本体の電源がオンになってないか確認してください。 充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。
運転中に停止した	起動してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。
EMSを感じない	お肌の保湿が十分でないか、本体がお肌にしっかり密着していない可能性があります。ピン全体がお肌に当たるようにしてご使用ください。
	ご使用のオイルや美容液の成分が通電を妨げている可能性があります。 一度ピンに付着した液体を拭き取ってからご使用をお試しください。